



ХОДУНКИ
ORTONICA XR101



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	3
1.1. Назначение	3
1.2. Показания	3
1.3. Противопоказания	3
1.4. Меры предосторожности	4
2. Особенности изделия	5
2.1. Комплектация	6
3. Подготовка к эксплуатации	6
4. Технические характеристики.....	10
5. Техническое обслуживание и уход.....	10
6. Гарантийное обслуживание.....	11

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Назначение

Ходунки Ortonica XR101 (далее по тексту - «ходунки») с функцией трансформации в кресло-каталку обеспечивают комфортное передвижение, как при самостоятельных прогулках, так и с сопровождающим лицом.

Ручные двухпозиционные стояночные тормоза обеспечивают мягкое притормаживание в верхнем положении и полную фиксацию в нижнем положении. Откидные подножки, подлокотники, мягкий упор для спины и мягкое сиденье делают отдых более удобным за счет возможности использовать ходунки в качестве стула и/или кресла-коляски. Съемная вместительная корзина под сиденьем удобна для транспортировки покупок и личных вещей.

Модельный ряд представлен в двух цветах:

- черный
- красный

1.2. Показания

- Умеренные и выраженные явления гемипареза.
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

1.3. Противопоказания

- Психические расстройства.
- Потеря функциональности обеих рук.
- Нарушения статики и координации движения.
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

1.4. Меры предосторожности

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками.
- Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы – ходунки могут опрокинуться.
- С осторожностью перемещайтесь по мокрым и скользким поверхностям.
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности.
- Нельзя использовать ходунки при головокружении.
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку.
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, не акцентируя внимание на ходунках.

2. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ



2.1. Комплектация

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Ходунки Ortonica XR101	1
2	Паспорт	1

3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Разложите раму. Для этого нажмите на трубы сиденья (рис. 1).



2. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоза.

Модель ходунков Ortonica XR101 оснащена ручными двухпозиционными стояночными тормозами (рис. 2).

Перевод ручек тормозов в верхнее положение обеспечивает мягкое притормаживание во время движения.

Перевод ручек тормозов в нижнее положение обеспечивает полную фиксацию во время остановки.




3. Отрегулируйте высоту ручек. Чтобы отрегулировать ручки, необходимо зажать красный кнопочный фиксатор (рис. 3), установить нужную высоту и отпустить фиксатор.



Для корректного определения высоты ходунков необходимо:

- Встать между опорами ходунков, выпрямить спину.
- Настроить высоту ходунков так, чтобы рукоятки находились на уровне запястий.
- Ладони опустить к ручкам опор так, чтобы основание большого пальца касалось ручки ходунков (рис. 4).

Рис. 4

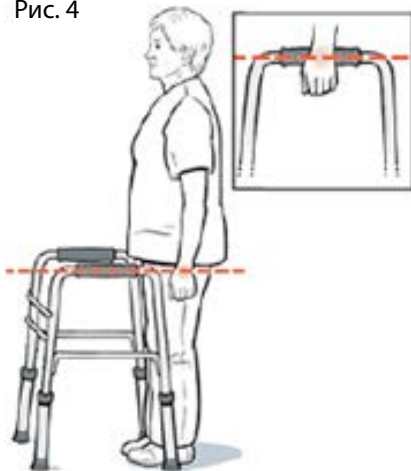


4. Отрегулируйте высоту упора для спины. Для этого необходимо ослабить болты-барашки (рис. 5), установить нужную высоту и закрутить болты.



5. Эластичный двухпозиционный упор для спины, можно переставлять в зависимости от потребностей пользователя на одну и на другую стороны (рис. 6).



6. Отрегулируйте подлокотники. Для этого сожмите фиксаторы (рис. 7) и переместите подлокотники в нижнее положение или поднимите подлокотники вверх.

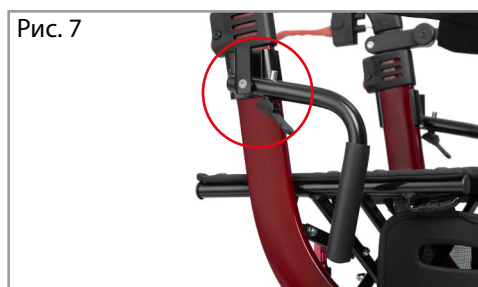

7. Отрегулируйте подножки. При использовании изделия в качестве кресла-каталки, подножки должны быть опущены вниз. Для этого нажмите и удерживайте красную кнопку (рис. 8) на каждой подножке и опустите их вниз. При использовании изделия в качестве ходунков-роллаторов, подножки должны быть подняты. Для этого нажмите и удерживайте красную кнопку на каждой подножке и поднимите их вверх (рис. 9).




8. При необходимости откиньте или разложите опоры для стоп (рис. 8).

9. Для того, чтобы сложить ходунки необходимо откинуть подножки и потянуть за ручку на сидении вверх (рис. 10).



Сложенную конструкцию можно закрепить специальным фиксатором (рис. 11).

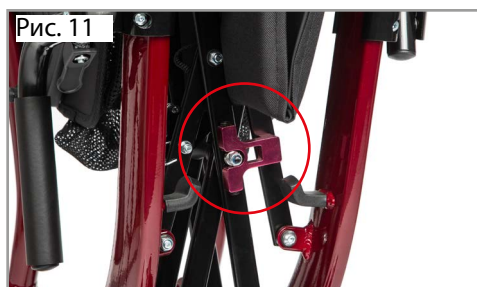

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая ширина, см	59,5
Общая длина, см	78-100
Общая высота, см	84,5-97
Расстояние между поручнями, см	44
Ширина в сложенном состоянии, см	30
Вес, кг ($\pm 5\%$)	10,5
Грузоподъемность, кг	136
Стояночный тормоз	двухпозиционные (торможение и остановка)
Диаметр колес (передние/задние), см	24,5/20
Длина подножек, см	48
Высота подлокотников, см	13 - 26,5

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Рекомендуется ежемесячно проверять конструкцию ходунков на отсутствие люфтов, степень загрязнения, а также проводить визуальный контроль быстроизнашивающихся деталей.

Обладая определенными техническими навыками, Вы сможете самостоятельно производить обслуживание ходунков, способствуя их безотказной работе:

- Периодически очищайте колеса от грязи и волос, а также обследуйте на предмет повреждений.
- Очищайте элементы рамы и пластиковую поверхность неагрессивным чистящим средством.
- Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.

Уход

Допускается влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы и колес агрессивными чистящими средствами, после чего элементы ходунков необходимо хорошо высушить.

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель ходунков	Ходунки Ortonica XR101
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Производитель	«Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China
Импортер в России	ООО «Реамед» Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930655)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Ходунки Ortonica XR101
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.
По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



ortonica.ru



8 (800) 707-44-52



service@ortonica.ru



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE