



ХОДУНКИ
ORTONICA XR103



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	3
1.1. Назначение	3
1.2. Показания	3
1.3. Противопоказания	3
1.4. Меры предосторожности	4
1.5. Иллюстрация спуска на ходунках	5
1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках	5
1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень	5
1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода	5
2. Особенности изделия	6
2.1. Комплектация	7
3. Подготовка к эксплуатации	7
4. Технические характеристики	9
5. Техническое обслуживание и уход	10
6. Гарантийное обслуживание	11

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодарим Вас за выбор продукции Ortonica. Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует подробно ознакомиться с данным руководством пользователя.

1.1. Назначение

Ходунки Ortonica XR103 (далее по тексту - «ходунки») предназначены для людей с ограниченными двигательными возможностями для самостоятельного передвижения в помещениях и во время прогулок на улице.

Съемная вместительная сумка под сиденьем удобна для транспортировки покупок и личных вещей. Мягкое сиденье и эластичный упор для спины делают отдых более комфортным за счет возможности использовать ходунки в качестве стула. Складная конструкция, компактные габариты в сложенном виде и легкий, но прочный алюминиевый каркас делают изделие удобным для хранения и транспортировки.

1.2. Показания

- Умеренные и выраженные явления гемипареза.
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.


1.3. Противопоказания

- Психические расстройства.
- Потеря функциональности обеих рук.
- Нарушения статики и координации движения.
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.
- Наркотическое или алкогольное воздействие.


1.4. Меры предосторожности

- Не используйте ходунки в качестве кресла-каталки.
- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору при помощи ходунков;
- Не переносите вес тела полностью на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться;
- Не ходите по мокрому или скользкому полу при помощи ходунков;
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности;
- Ходунки нельзя тянуть на себя, поднимаясь с кресла или кровати;
- Нельзя использовать ходунки при головокружении;
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела - держать осанку;
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, а не на ноги.


1.5. Иллюстрация спуска на ходунках

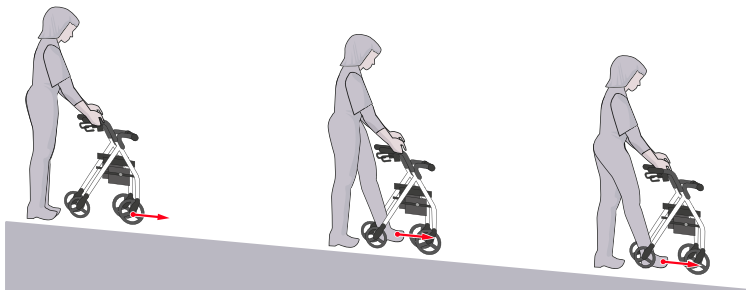

1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках

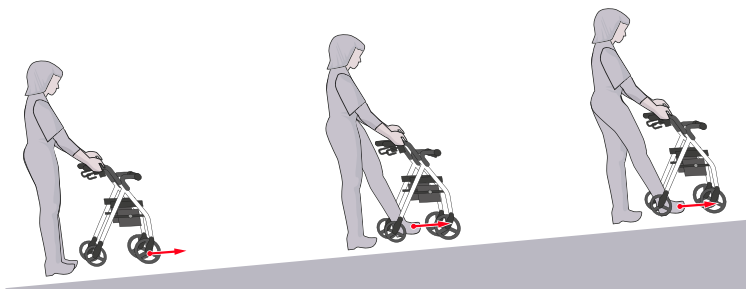

1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень

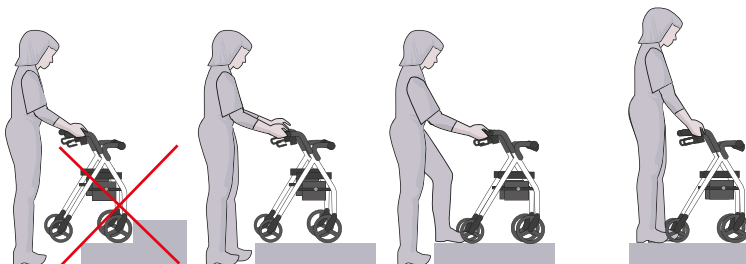

1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода



2. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ




2.1. Комплектация

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Ходунки Ortonica XR103	1
2	Паспорт	1

3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Разложите передние и задние колеса (рис. 1).

Рис. 1

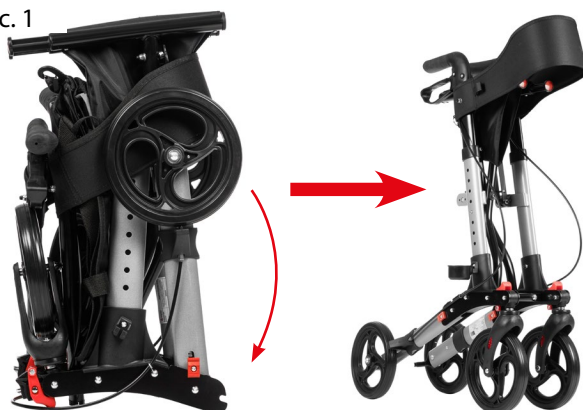

2. Разложите раму, надавливая вниз на трубы сиденья (рис. 2).

Рис. 2



3. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоза. Модель ходунков Ortonica XR103 оснащена ручными стояночными тормозами (рис. 3), обеспечивающими мягкое притормаживание в верхнем положении и полную фиксацию в нижнем положении.




4. Отрегулируйте высоту ходунков в зависимости от роста пользователя. Для этого нажмите на кнопочный фиксатор (рис. 4), установите нужную высоту и отпустите фиксатор.



Для корректного определения высоты ходунков необходимо:

- Встать между опорами ходунков, выпрямить спину.
- Настроить высоту ходунков так, чтобы рукоятки находились на уровне запястий.
- Ладони опустить к ручкам опор так, чтобы основание большого пальца касалось ручки ходунков (рис. 5).

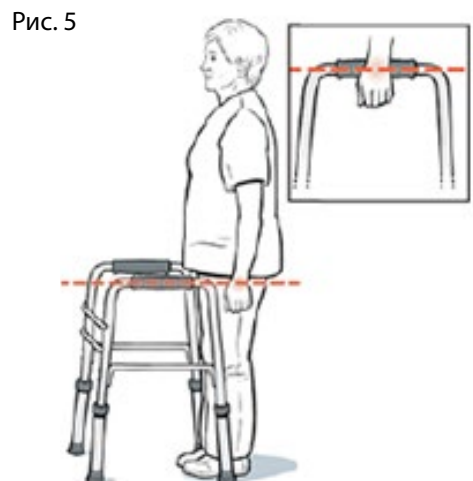

6. Для того, чтобы сложить ходунки необходимо потянуть за ручку на сидении вверх (рис. 6).



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая ширина, см	64
Общая длина, см	66
Общая высота, см	78,5-96
Расстояние между поручнями, см	45
Ширина в сложенном состоянии, см	26
Вес, кг ($\pm 5\%$)	8,25
Грузоподъемность, кг	136
Стояночный тормоз	двухпозиционные (торможение и остановка)
Диаметр колес (передние/задние), см	19,8/19,8

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Рекомендуется ежемесячно проверять конструкцию ходунков на отсутствие люфтов, степень загрязнения, а также проводить визуальный контроль быстроизнашивающихся деталей.

Обладая определенными техническими навыками, Вы сможете самостоятельно производить обслуживание ходунков, способствуя их безотказной работе:

- Периодически очищайте колеса от грязи и волос, а также обследуйте на предмет повреждений.
- Очищайте элементы рамы и пластиковую поверхность неагрессивным чистящим средством.
- Двигающиеся части слегка смазывайте машинным маслом.

Уход

Допускается влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы и колес агрессивными чистящими средствами, после чего элементы ходунков необходимо хорошо высушить.

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель ходунков	Ходунки Ortonica XR103
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Производитель	«Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China
Импортер в России	ООО «Реамед» Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930655)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Ходунки Ortonica XR103
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____ подпись покупателя



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.
По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



ortonica.ru



8 (800) 707-44-52



service@ortonica.ru



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE