



ХОДУНКИ
ORTONICA XR104



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение	3
Противопоказания	3
Меры предосторожности	4
Показания	4
Технические характеристики	4
Комплект поставки	4
Подготовка к эксплуатации	5
Гарантийное обслуживание	7



Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует подробно ознакомиться с данным руководством пользователя.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ходунки Ortonica XR104 предназначены для облегчения самостоятельного передвижения людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и пожилых людей в домашних условиях и во время прогулок на улице. Использование ходунков улучшает координацию движений, позволяет сохранять равновесие и уменьшает нагрузку на ноги. Благодаря мягкому сиденью и упору для спины ходунки могут быть использованы для комфортного отдыха.

Ходунки изготовлены из легкого и прочного алюминиевого сплава, имеют высококачественное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента.

Ходунки оснащены мягким сиденьем с ручкой для складывания, полукруглым мягким упором для спины и корзиной для личных вещей.

Модельный ряд представлен в пяти цветах:

- черный;
- белый;
- красный;
- синий;
- коричневый.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Психические расстройства.
- Потеря функциональности обеих рук.
- Нарушения статики и координации движения.
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте ходунки в качестве кресла-каталки.
- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками.
- Не переносите вес тела полностью на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться.
- С осторожностью перемещайтесь по мокрым и скользким поверхностям.
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности.
- Не используйте ходунки при головокружении.
- Старайтесь при использовании ходунков поддерживать максимально ровное положение спины и тела.
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, не акцентируя внимание на ходунках.

ПОКАЗАНИЯ

- Умеренные и выраженные явления гемипареза.
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая ширина, см	60
Общая длина, см	70,5
Общая высота, см	84,5-96,5
Расстояние между поручнями, см	42,5
Ширина в сложенном состоянии, см	27
Вес, кг ($\pm 5\%$)	7,75
Грузоподъемность, кг	136
Стояночный тормоз	двухпозиционные (торможение и остановка)
Диаметр колес (передние/задние), см	25/20
Материал	Алюминий

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Ходунки Ortonica XR104	1
2	Паспорт	1

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Разложите раму. Для этого нажмите на трубы сиденья.
2. Отрегулируйте высоту ручек в зависимости от роста пользователя. Зажмите кнопку на ручке и установите необходимую высоту, затем аналогично отрегулируйте высоту второй ручки (рис. 1).



При изменении высоты ручек плавно опускайте или поднимайте телескопическую трубку. Избегайте резких рывков, чтобы не повредить внутренний тормозной трос. После фиксации высоты обязательно проверьте свободный ход тормозных рычагов.

Рис. 2

Для корректного определения высоты ходунков необходимо:

- Встать между опорами ходунков, выпрямить спину.
- Настроить высоту ходунков так, чтобы рукоятки находились на уровне запястий.
- Ладони опустить к ручкам опор так, чтобы основание большого пальца касалось ручки ходунков.

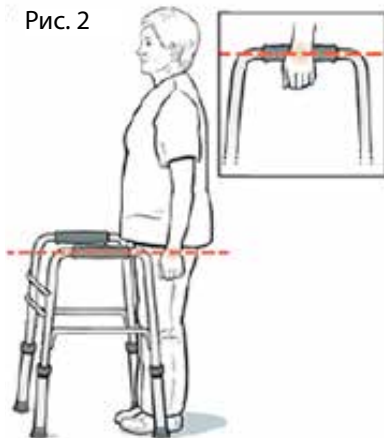


Рис. 3

3. Отрегулируйте высоту опоры для спины. Для этого ослабьте барашковые фиксаторы на ручках, установите необходимое положение, затяните фиксаторы (рис. 3).



4. При необходимости установите сумку для хранения личных вещей.

5. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоза.

Модель ходунков Ortonica XR104 оснащена двухпозиционными стояночными тормозами.

Перевод ручек тормозов в верхнее положение обеспечивает мягкое притормаживание во время движения.

Перевод ручек тормозов в нижнее положение обеспечивает полную фиксацию во время остановки (рис. 4).



6. Для того, чтобы сложить ходунки потяните за ручку на сиденье (рис. 5).



Если при складывании чувствуется жесткое сопротивление, не применяйте силу. Убедитесь, что тормозной трос свободно уходит внутрь рамы и не зажат элементами складного механизма.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель ходунков	Ходунки Ortonica XR104
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Производитель	«Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China
Импортер в России	ООО «Реамед» Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930655)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Ходунки Ortonica XR104
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.
По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



ortonica.ru



8 (800) 707-44-52



service@ortonica.ru



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE



Купили этот товар на маркетплейсе?

По всем возникающим вопросам по товарам, приобретенным на маркетплейсах (OZON, WB и т.д.) у официального дилера ООО «Катион», включая:

- вопросы качества,
 - комплектности товара,
 - условий использования,
- просим обращаться:



8 (800) 550-85-58



info@plus-ion.ru