



ХОДУНКИ

ORTONICA **XR203**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	3
1.1. Назначение	3
1.2. Показания	3
1.3. Противопоказания	3
1.4. Меры предосторожности	3
1.5. Иллюстрация спуска на ходунках	4
1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках	4
1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень	4
18. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода	4
2. Описание и технические характеристики	5
2.1. Особенности ходунков	5
2.2. Технические характеристики	5
3. Эксплуатация ходунков	6
3.1. Подготовка к эксплуатации	6
3.2. Очистка	9
4. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам	9
5. Правила хранения и транспортировки	10
6. Сервисное обслуживание	10
7. Гарантийное обслуживание	11

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Назначение

Ходунки Ortonica XR203 (далее по тексту - «ходунки») предназначены для передвижения людей с ограниченными двигательными возможностями в помещении. Эти четырехколесные ходунки оснащены мягкой U-образной опорой для предплечья, которая обеспечивает дополнительный комфорт и поддержку.

Конструкция ходунков устойчива к опрокидыванию, что повышает безопасность пользователя. Также предусмотрена встроенная опора для капельницы, что делает их удобными для людей, нуждающихся в специальном медицинском уходе. Прочная стальная рама обеспечивает надежность, а хромированное покрытие защищает от коррозии.

1.2. Показания

- Умеренные и выраженные явления гемипареза.
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

1.3. Противопоказания

- Психические расстройства;
- Потеря функциональности обеих рук;
- Нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

1.4. Меры предосторожности

- Не используйте ходунки в качестве кресла-каталки.
- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору при помощи ходунков.
- Не переносите вес тела полностью на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться.
- Не ходите по мокрому или скользкому полу при помощи ходунков.
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности.
- Не тяните ходунки на себя, поднимаясь с кресла или кровати.
- Не используйте ходунки при головокружении.
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела - держать осанку.
- При ходьбе старайтесь смотреть вперед, а не на ноги.


1.5. Иллюстрация спуска на ходунках



1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках



1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень

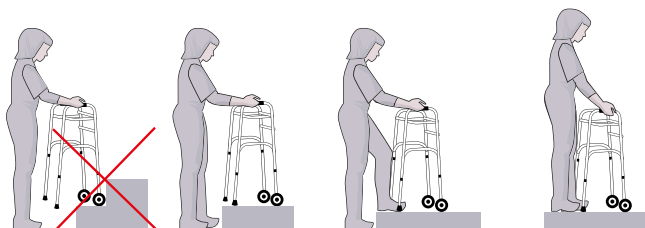


18. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода



Любое нарушение рекомендаций изготовителя по применению ходунка может нанести вред лицу, пользующемуся ходунком, или привести к его повреждению.

2. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Особенности ходунков

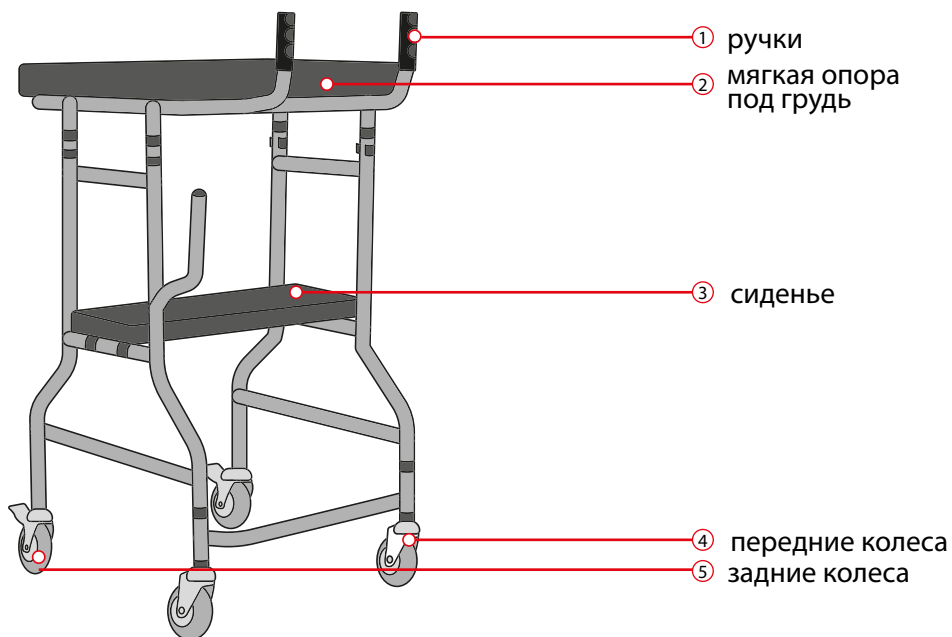

2.2. Технические характеристики

Общая ширина, см	56
Общая длина, см	69
Общая высота, см	107-132
Расстояние между поручнями, см	35,5
Длина в сложенном состоянии, см	56,5
Вес, кг ($\pm 5\%$)	10,2
Грузоподъемность, кг	100
Стояночный тормоз	Ножные
Диаметр колес (передние/задние), см	10/10

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОДУНКОВ

3.1. Подготовка к эксплуатации

1. Разложите раму ходунков. Для этого разведите рамы ходунков в противоположные стороны (рис. 1).


Рис. 1



2. Установите удлинители опоры под грудь к раме с помощью штырьковых фиксаторов (рис. 2)

Для того, чтобы отрегулировать высоту ножек, снимите штырьковый фиксатор (рис. 2), установите необходимую высоту и зафиксируйте штырьковый фиксатор.

Рис. 2

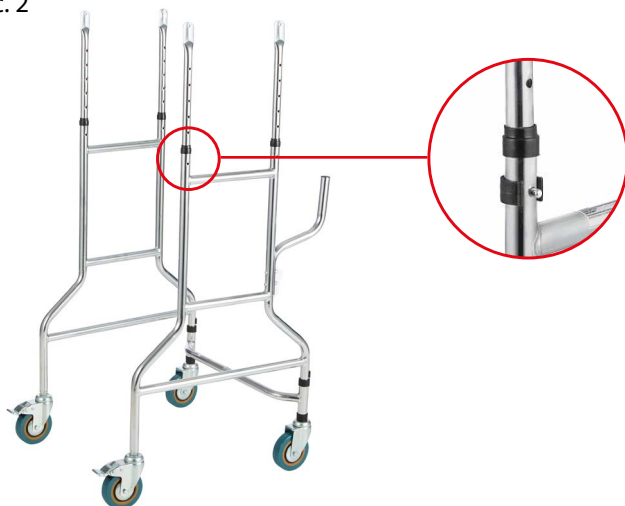

3. Установите опору под грудь к удлинителям с помощью винтов, гаек и ключа входящих в комплект (рис. 3).

Рис. 3



4. Установите сиденье нажав на места крепления (рис. 4).

Рис. 4



5. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоза. Модель ходунков Ortonica XR203 оснащена стояночными тормозами задних колес (рис. 5), обеспечивающими полную фиксацию в нижнем положении. Защелкните оба фиксатора на задних колесах для прекращения движения.



3.2. Очистка

Наружные поверхности ходунков обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

4. ТРЕБОВАНИЯ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ

Климатические исполнения ходунков — У1. У1.1. УХЛ4.2 по ГОСТ 15150—69.

Ходунки климатических исполнений У1, У1.1. УХЛ4.2 сохраняют работоспособность в процессе нормального использования при воздействии температуры, номинальные значения которой приведены в таблице.

Климатическое исполнение	Номинальные значения температуры, С°	
	верхнее	нижнее
У1. У1.1.	+40	-40
УХЛ4.2	+35	+10
При кратковременной эксплуатации ходунков (не более 30 мин). При длительной эксплуатации ходунков устанавливают нижнее номинальное значение температуры минус 25 С°		

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию. Ходунки транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение ходунков без упаковки завода изготовителя не гарантирует их сохранность.

Ходунки не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

6. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании Ortonica.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании ходунков, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре компании Ortonica, или у Вашего регионального представителя.

7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель	Ходунки Ortonica XR203
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Производитель	«Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guandong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China
Импортер в России	ООО «Реамед» Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930655)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Ходунки Ortonica XR203
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- износ и повреждение колес.

Гарантия предусмотрена на изделие целиком, на отдельные детали - гарантия не предусмотрена.



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.
По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



ortonica.ru



8 (800) 707-44-52



service@ortonica.ru



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE