



ХОДУНКИ
ORTONICA XS302



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	3
1.1. Назначение	3
1.2. Показания	3
1.3. Противопоказания	3
1.4. Меры предосторожности	4
1.5. Иллюстрация спуска на ходунках	5
1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках	5
1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень	5
1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода	5
2. Особенности изделия	6
2.1. Комплектация	7
3. Подготовка к эксплуатации	7
4. Технические характеристики.....	10
5. Техническое обслуживание и уход.....	10
6. Гарантийное обслуживание.....	11

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Благодарим Вас за выбор продукции Ortonica. Для безопасной и приятной эксплуатации компания Ortonica рекомендует подробно ознакомиться с данным руководством пользователя.

1.1. Назначение

Ходунки Ortonica XS302 (далее по тексту - «ходунки») - стильные ходунки-роллаторы с опорой на предплечье. Предназначены для людей с ограниченными двигательными возможностями для комфортных прогулок.

Складная конструкция, компактные габариты в сложенном виде и легкая, но прочная алюминиевая рама делают изделие удобным для хранения и транспортировки. Мягкое сиденье и эластичный упор для спины обеспечивают комфортный отдых во время остановки.

1.2. Показания

- Умеренные и выраженные явления гемипареза.
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.


1.3. Противопоказания

- Психические расстройства.
- Потеря функциональности обеих рук.
- Нарушения статики и координации движения.
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.
- Наркотическое или алкогольное воздействие.


1.4. Меры предосторожности

- Не используйте ходунки в качестве кресла-каталки;
- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору при помощи ходунков;
- Не переносите вес тела полностью на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться;
- Не ходите по мокрому или скользкому полу при помощи ходунков;
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности;
- Не тяните ходунки на себя, поднимаясь с кресла или кровати;
- Не используйте ходунки при головокружении;
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела - держать осанку;
- При ходьбе старайтесь смотреть вперед, а не на ноги.


1.5. Иллюстрация спуска на ходунках

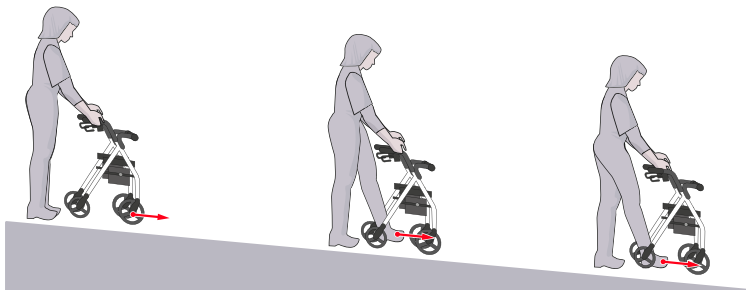

1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках

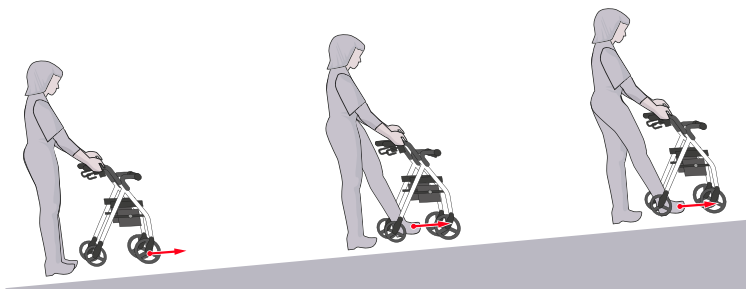

1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень

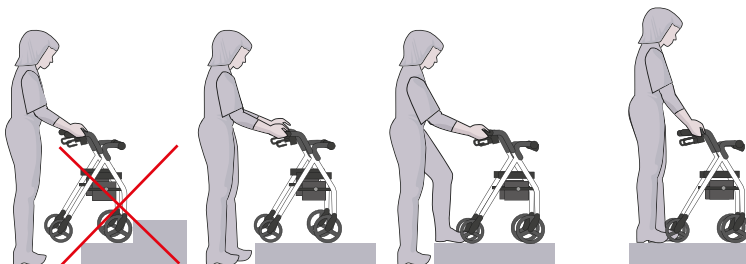

1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода



2. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ



2.1. Комплектация

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Ходунки Ortonica XS302	1
2	Паспорт	1
3	Инструкция	1

3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Разложите раму, надавливая на трубы сиденья (рис. 1).

Рис. 1



2. Установите колеса в раму ходунков. Для того, чтобы установить передние колеса, вставьте колесо в раму и туго затяните барашковый болт (рис. 2). Для того, чтобы установить задние колеса вставьте колесо до характерного щелчка фиксатора (рис. 3)

Рис. 2

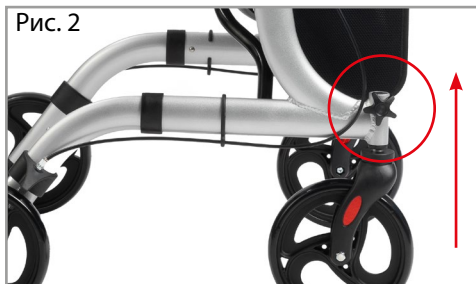


Рис. 3



3. Вставьте рукоятки в подлокотные опоры и отрегулируйте их глубину. Для этого ослабьте фиксатор (рис. 4), установите рукоятки, отрегулируйте необходимую глубину и затяните фиксатор.



4. Вставьте подлокотные опоры в раму ходунков до характерного щелчка (рис. 5). Опоры должны быть установлены параллельно друг другу. Отрегулируйте высоту ходунков в зависимости от роста пользователя. Для этого нажмите на кнопочный фиксатор (рис. 5), установите нужную высоту и отпустите фиксатор.




5. Отрегулируйте высоту ходунков в зависимости от роста пользователя.

Для корректного определения высоты ходунков необходимо:

- Встать между опорами ходунков, выпрямить спину.
- Настроить высоту ходунков так, чтобы рукоятки находились на уровне запястий.
- Ладони опустить к ручкам опор так, чтобы основание большого пальца касалось ручки ходунков (рис. 6).

Рис. 6

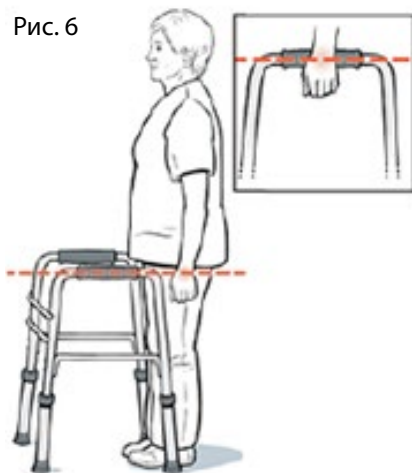

6. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоза. Модель ходунков Ortonica XS302 оснащена ручными стояночными тормозами, если потянуть тормоз к рукоятке (рис. 7), то он обеспечивает мягкое притормаживание, если тормоз отставить вперед (рис. 8), то это обеспечит полную фиксацию.

Рис. 7



Рис. 8



7. Для того, чтобы сложить ходунки необходимо потянуть за ручку на сидении вверх (рис. 9).

Рис. 9



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая ширина, см	63
Общая длина, см	71,5-93,5
Общая высота, см	112,5-128
Расстояние между поручнями, см	46,5
Ширина в сложенном состоянии, см	25
Грузоподъемность, кг	136
Стояночный тормоз	двухпозиционные (торможение и остановка)
Диаметр колес (передние/задние), см	20/20

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Рекомендуется ежемесячно проверять конструкцию ходунков на отсутствие люфтов, степень загрязнения, а также проводить визуальный контроль быстроизнашивающихся деталей.

Обладая определенными техническими навыками, Вы сможете самостоятельно производить обслуживание ходунков, способствуя их безотказной работе:

- Периодически очищайте колеса от грязи и волос, а также обследуйте на предмет повреждений.
- Очищайте элементы рамы и пластиковую поверхность неагрессивным чистящим средством.
- Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.

Уход

Допускается влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы и колес агрессивными чистящими средствами, после чего элементы ходунков необходимо хорошо высушить.

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель ходунков	Ходунки Ortonica XS302
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Производитель	«Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China
Импортер в России	ООО «Реамед» Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930655)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Ходунки Ortonica XS302
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____ подпись покупателя



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.
По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



ortonica.ru



8 (800) 707-44-52



service@ortonica.ru



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE