



ХОДУНКИ
ORTONICA XS304



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	3
1.1. Назначение	3
1.2. Показания	3
1.3. Противопоказания	3
1.4. Меры предосторожности	3
1.5. Иллюстрация спуска на ходунках	5
1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках	5
1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень	5
1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода	5
2. Особенности изделия	6
2.1. Комплектация	6
3. Подготовка к эксплуатации	7
4. Технические характеристики.....	10
5. Техническое обслуживание и уход.....	10
6. Гарантийное обслуживание.....	11

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Назначение

Ходунки Ortonica XS304 (далее по тексту - «ходунки») - ультралегкие ходунки-роллаторы с лаконичным дизайном. Предназначены для людей с ограниченными двигательными возможностями для самостоятельного передвижения в помещениях и во время прогулок на улице.

Конструкция рамы из алюминия, компактная в сложенном виде, обеспечивает удобство хранения и транспортировки. Мягкое сиденье и эластичный упор для спины, регулируемый по высоте, обеспечивают комфортный отдых во время остановки.

Ходунки Ortonica XS304 представлены в 2 цветах на выбор: синем и белом.

1.2. Показания

- Умеренные и выраженные явления гемипареза;
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей;
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

1.3. Противопоказания


- Психические расстройства;
- Потеря функциональности обеих рук;
- Нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

1.4. Меры предосторожности


- Не используйте ходунки в качестве кресла-каталки.
- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору при помощи ходунков.
- Не переносите вес тела полностью на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться.
- Не ходите по мокрому или скользкому полу при помощи ходунков.
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности.
- Не тяните ходунки на себя, поднимаясь с кресла или кровати.

- Не используйте ходунки при головокружении.
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела - держать осанку.
- При ходьбе старайтесь смотреть вперед, а не на ноги.


1.5. Иллюстрация спуска на ходунках

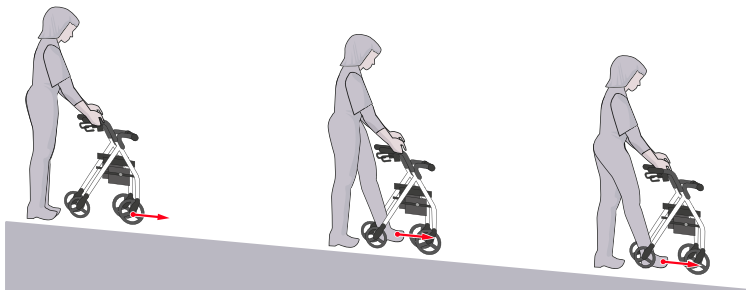

1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках

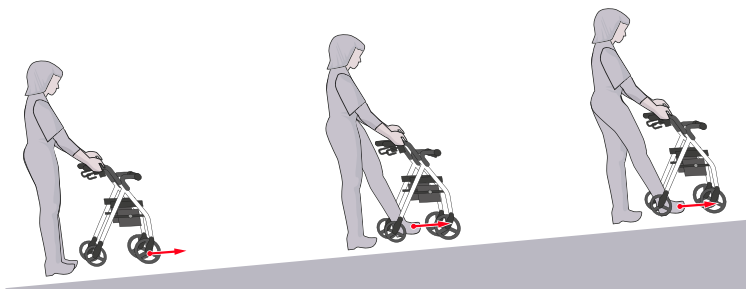

1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень

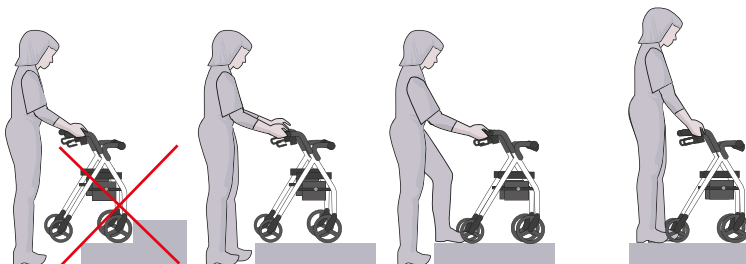

1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода



2. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ



2.1. Комплектация


№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Ходунки Ortonica XS304	1
2	Паспорт	1
3	Инструкция	1

3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Разложите раму ходунков, надавливая вниз на трубы сиденья (рис. 1).




С помощью ручек, отрегулируйте высоту ходунков в зависимости от роста пользователя. Для этого откройте зажим (рис. 2, поз. А), нажмите и удерживайте кнопку (рис. 2, поз. В), установите нужную длину ручек, отпустите кнопку и закройте зажим.

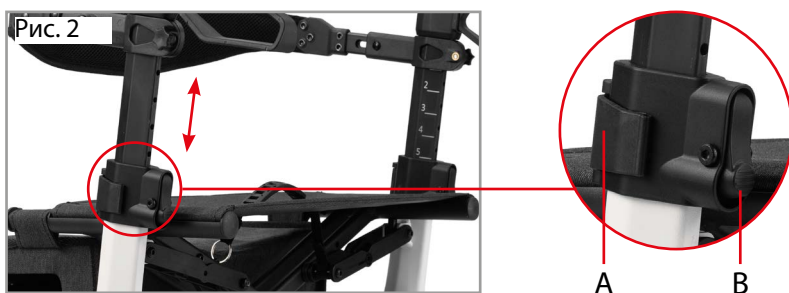

Для корректного определения высоты ходунков необходимо:

- Встать между опорами ходунков, выпрямить спину.
- Настроить высоту ходунков так, чтобы рукоятки находились на уровне запястий.
- Ладони опустить к ручкам опор так, чтобы основание большого пальца касалось ручки ходунков (рис. 3).

Рис. 3

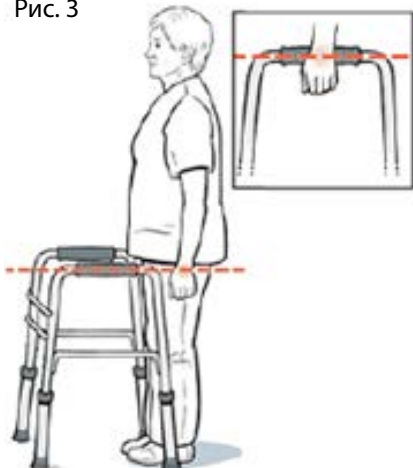


4. Упор для спины регулируется по высоте и глубине. Для того, чтобы отрегулировать высоту упора открутите барашковый винт (рис. 4), установите нужное положение упора и закрутите барашковый винт.


Рис. 4




Для регулировки упора по глубине нажмите на кнопочный фиксатор (рис. 5), отрегулируйте положение упора и отпустите кнопочный фиксатор.

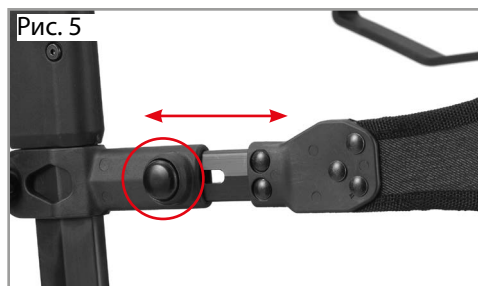

5. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоза. Модель ходунков Ortonica XS304 оснащена ручными двухпозиционными стояночными тормозами (рис. 6), обеспечивающими мягкое притормаживание в верхнем положении и полную фиксацию в нижнем положении.

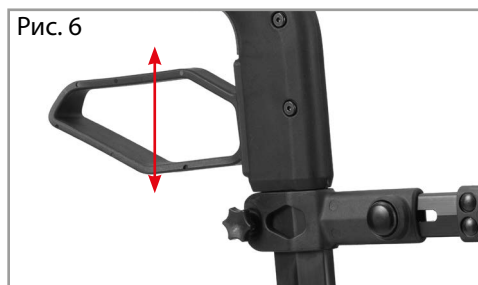

6. Для того, чтобы сложить ходунки необходимо потянуть за ручку на сиденье вверх (рис. 7).

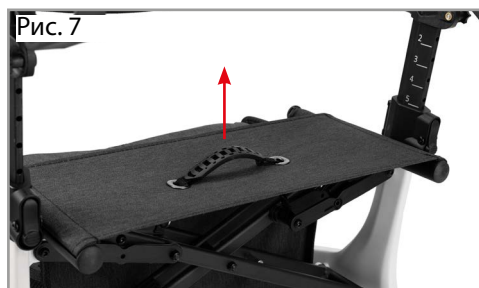

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая высота, см	79,5-94
Общая ширина, см	59
Общая длина, см	67
Ширина в сложенном состоянии, см	25
Грузоподъемность, кг	136
Вес, кг ($\pm 5\%$)	6,9
Стояночный тормоз	двухпозиционные (торможение и остановка)
Диаметр колес (передние/задние), см	23/19

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Рекомендуется ежемесячно проверять конструкцию ходунков на отсутствие люфтов, степень загрязнения, а также проводить визуальный контроль быстроизнашивающихся деталей.

Обладая определенными техническими навыками, Вы сможете самостоятельно производить обслуживание ходунков, способствуя их безотказной работе:

- Периодически очищайте колеса от грязи и волос, а также обследуйте на предмет повреждений.
- Очищайте элементы рамы и пластиковую поверхность неагрессивным чистящим средством.
- Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.

Уход

Допускается влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы и колес агрессивными чистящими средствами, после чего элементы ходунков необходимо хорошо высушить.

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель ходунков	Ходунки Ortonica XS304
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Производитель	«Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China
Импортер в России	ООО «Реамед» Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930655)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Ходунки Ortonica XS304
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.
По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



ortonica.ru



8 (800) 707-44-52



service@ortonica.ru



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE



Купили этот товар на маркетплейсе?

По всем возникающим вопросам по товарам, приобретенным на маркетплейсах (OZON, WB и т.д.) у официального дилера ООО «Катион», включая:

- вопросы качества,
 - комплектности товара,
 - условий использования,
- просим обращаться:



8 (800) 550-85-58



info@plus-ion.ru