



ХОДУНКИ
ORTONICA XS305



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	3
1.1. Назначение	3
1.2. Показания	3
1.3. Противопоказания	3
1.4. Меры предосторожности	3
1.5. Иллюстрация спуска на ходунках	4
1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках	4
1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень	4
1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода	4
2. Описание и технические характеристики	5
2.1. Особенности ходунков	5
2.2. Технические характеристики	5
3. Эксплуатация ходунков	6
3.1. Подготовка к эксплуатации	6
3.2. Очистка	9
4. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам	9
5. Правила хранения и транспортировки	10
6. Сервисное обслуживание	10
7. Гарантийное обслуживание	11

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Назначение

Ходунки Ortonica XS305 (далее по тексту - «ходунки») предназначены для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Замок на передней части конструкции позволяет передвигаться как в фиксированном, так и в шагающем режиме. Конструкция ходунков складывается и раскладывается за счет нажатия на фиксаторы пальцами, ладонью или ребром кисти. Ножки подстраиваются под рост пользователя легким нажатием на кнопочный замок, уменьшая нагрузку на суставы.

1.2. Показания

- Умеренные и выраженные явления гемипареза;
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей;
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.


1.3. Противопоказания

- Психические расстройства;
- Потеря функциональности обеих рук;
- Нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- Наркотическое или алкогольное воздействие.


1.4. Меры предосторожности

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору при помощи ходунков;
- Не переносите весь вес тела полностью на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться;
- Не ходите по мокрому или скользкому полу при помощи ходунков;
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности;
- Не тяните ходунки на себя, поднимаясь с кресла или кровати;
- Не используйте ходунки при головокружении;
- Не подходите слишком близко или в упор к ходункам;
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела, держите осанку;
- При ходьбе старайтесь смотреть вперед, а не под ноги.


1.5. Иллюстрация спуска на ходунках

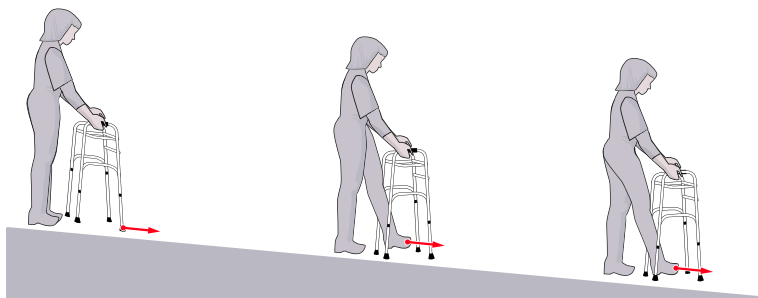


1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках

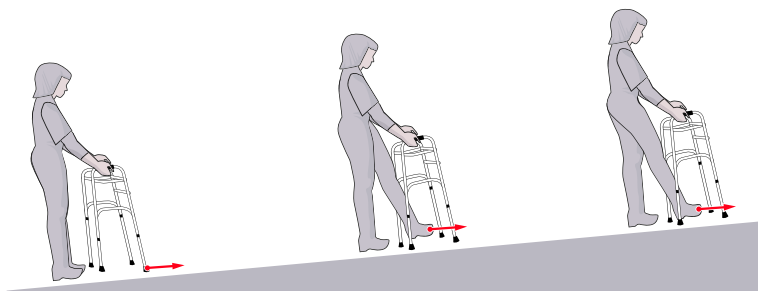

1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень

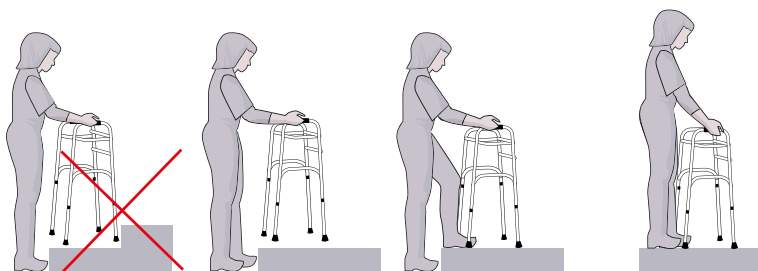

1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода

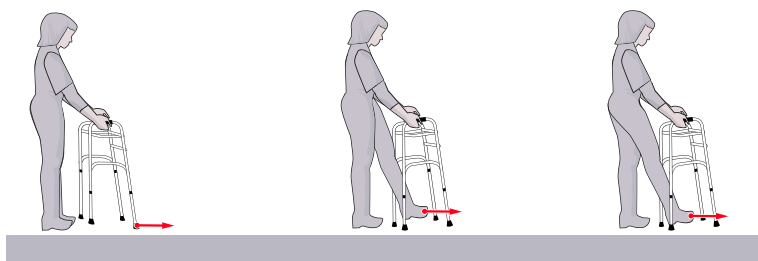

2. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Особенности ходунков



2.2. Технические характеристики

Общая ширина, см	53,5-69
Общая длина, см	48-52,5
Общая высота, см	74,5-95
Расстояние между поручнями, см	46
Вес, кг ($\pm 5\%$)	2,3
Грузоподъемность, кг	100
Длина в сложенном состоянии, см	10

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОДУНКОВ

3.1. Подготовка к эксплуатации

1. Разложите раму ходунков, для этого поверните обе стороны ходунков до характерного щелчка (рис. 1).

Рис. 1



2. Отрегулируйте высоту ножек, для этого зажмите кнопочный фиксатор (рис. 2), установите необходимую высоту и отпустите фиксатор. Убедитесь, что ножки ходунков находятся на одинаковой высоте.


Рис. 2



Для корректного определения высоты ходунков необходимо:


- Встать между опорами ходунков, выпрямить спину.
- Настроить высоту ходунков так, чтобы рукоятки находились на уровне запястий.
- Ладони опустить к ручкам опор так, чтобы основание большого пальца касалось ручки ходунков (рис. 3).

Рис. 3

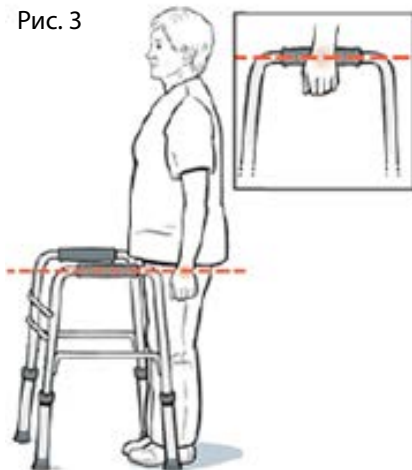

3. Для перевода ходунков в фиксированный режим, установите кнопочные замки с обеих сторон в верхнее положение (рис. 4). Для перевода в шагающий режим переместите кнопочные замки (рис. 4) в нижнее положение.

Рис. 4

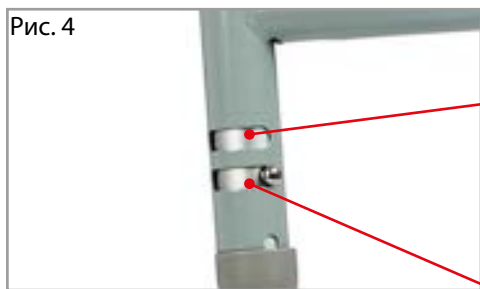

Фиксированный режим



Шагающий режим

4. Для того, чтобы сложить ходунки зажмите фиксатор на передней опоре рамы (рис. 5) и поверните боковые рамы внутрь.

Рис. 5



3.2. Очистка

Наружные поверхности ходунков обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

4. ТРЕБОВАНИЯ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ

Климатические исполнения ходунков — У1. У1.1. УХЛ4.2 по ГОСТ 15150—69.

Ходунки климатических исполнений У1, У1.1. УХЛ4.2 сохраняют работоспособность в процессе нормального использования при воздействии температуры, номинальные значения которой приведены в таблице.

Климатическое исполнение	Номинальные значения температуры, С°	
	верхнее	нижнее
У1. У1.1.	+40	-40
УХЛ4.2	+35	+10
При кратковременной эксплуатации ходунков (не более 30 мин). При длительной эксплуатации ходунков устанавливают нижнее номинальное значение температуры минус 25 С°		

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию. Ходунки транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение ходунков без упаковки завода изготовителя не гарантирует их сохранность.

Ходунки не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

6. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании Ortonica.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании ходунков, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре компании Ortonica, или у Вашего регионального представителя.

7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель ходунков	Ходунки Ortonica XS305
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Производитель	«Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China
Импортер в России	ООО «Реамед» Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930655)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Ходунки Ortonica XS305
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы.

Гарантия предусмотрена на изделие целиком, на отдельные детали - гарантия не предусмотрена.

КОНТАКТЫ ORTONICA

Представленные фотографии носят иллюстративный характер.

По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:

 ortonica.ru

 8 (800) 707-44-52

 service@ortonica.ru



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE

КУПИЛИ ЭТОТ ТОВАР НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ?

По всем возникающим вопросам по товарам, приобретенным на маркетплейсах (OZON, WB и т.д.) у официального дилера ООО «Катион», включая:

- вопросы качества,
- комплектности товара,
- условий использования,

просим обращаться по телефону 8 800 550 85 58.



 info@plus-ion.ru

 8 (800) 550-85-58