



ХОДУНКИ
ORTONICA XR102



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	3
1.1. Назначение	3
1.2. Показания	3
1.3. Противопоказания	3
1.4. Меры предосторожности	3
1.4. Иллюстрация спуска на ходунках	4
1.5. Иллюстрация крутого подъема на ходунках	4
1.6. Иллюстрация подъема на бордюрный камень	4
1.7. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода	4
2. Описание и технические характеристики	5
2.1. Особенности ходунков	5
2.2. Технические характеристики	5
3. Эксплуатация ходунков	6
3.1. Подготовка к эксплуатации	6
3.2. Очистка	8
4. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам	8
5. Правила хранения и транспортировки	9
6. Сервисное обслуживание	9
7. Гарантийное обслуживание	10

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Назначение

Ходунки Ortonica XR102 (далее по тексту - «ходунки») обеспечивают комфортное самостоятельное передвижение в помещении и на улице за счет маневренных и долговечных цельнолитых колес.

Ручные двухпозиционные стояночные тормоза обеспечивают мягкое притормаживание в верхнем положении и полную фиксацию в нижнем положении. Мягкое сиденье с жестким основанием и эластичный упор для спины позволяют использовать ходунки в качестве стула. Съемная вместительная корзина под сиденьем удобна для транспортировки покупок и личных вещей.

1.2. Показания

- Умеренные и выраженные явления гемипареза;
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей;
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

1.3. Противопоказания

- Психические расстройства;
- Потеря функциональности обеих рук;
- Нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- Наркотическое или алкогольное воздействие.


1.4. Меры предосторожности

- Не используйте ходунки в качестве кресла-каталки.
- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору при помощи ходунков;
- Не переносите вес тела полностью на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться;
- Не ходите по мокрому или скользкому полу при помощи ходунков;
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности;
- Ходунки нельзя тянуть на себя, поднимаясь с кресла или кровати;
- Нельзя использовать ходунки при головокружении;
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела - держать осанку;
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, а не под ноги.


1.4. Иллюстрация спуска на ходунках



1.5. Иллюстрация крутого подъема на ходунках

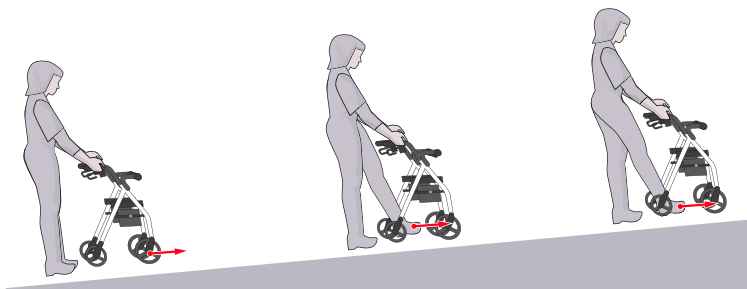

1.6. Иллюстрация подъема на бордюрный камень

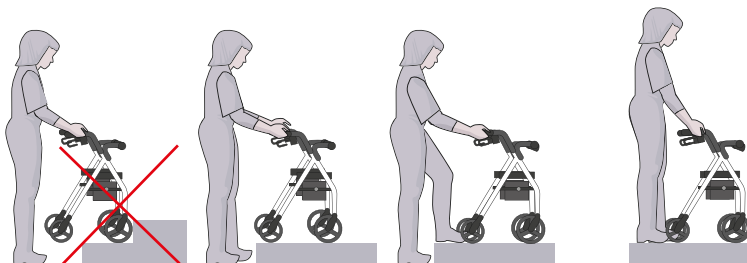

1.7. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода



2. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Особенности ходунков



2.2. Технические характеристики

Общая ширина, см	60
Общая длина, см	71
Общая высота, см	82,5-92,5
Расстояние между поручнями, см	48
Длина в сложенном состоянии, см	29
Вес, кг ($\pm 5\%$)	6,6
Грузоподъемность, кг	100
Стояночный тормоз	двухпозиционные (торможение и остановка)
Диаметр колес (передние/задние), см	15/15

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОДУНКОВ

3.1. Подготовка к эксплуатации

1. Разложите раму, поднимите сиденье и поместите багажную корзину под сиденье, опустите сиденье (рис. 1).



2. Установите ручки в раму и зафиксируйте их болтом-барашком. Ручки должны быть установлены параллельно друг другу (рис. 2).

Отрегулируйте высоту ручек ходунков в зависимости от роста пользователя. Для этого необходимо ослабить болты-барашки (рис. 3), установить нужную высоту и закрутить болты.

Рис. 2

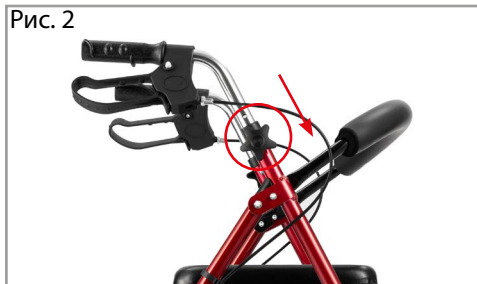


Рис. 3



3. Установите передние и задние колеса и зафиксируйте их болтами-барашками (рис. 4).


Рис. 4



4. Для корректного определения высоты ходунков необходимо:

- Встать между опорами ходунков, выпрямить спину.
- Настроить высоту ходунков так, чтобы рукоятки находились на уровне запястий.
- Ладони опустить к ручкам опор так, чтобы основание большого пальца касалось ручки ходунков (рис. 5).

Рис. 5

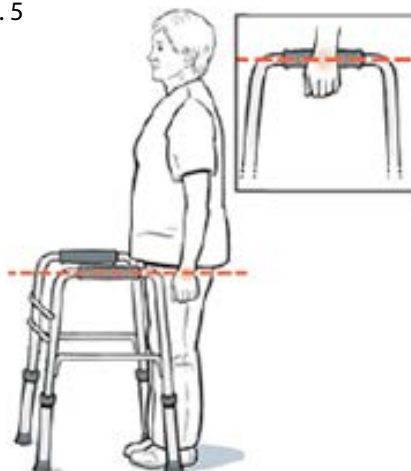

5. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоза. Модель ходунков Ortonica XR102 оснащена ручными двухпозиционными стояночными тормозами (рис. 6), обеспечивающими мягкое притормаживание в верхнем положении и полную фиксацию в нижнем положении.

Рис. 6



6. Для того, чтобы сложить ходунки необходимо поднять сидение, убрать корзину, потянуть за ручку, которая находится под сидением вверх (рис. 7).



3.2. Очистка

Наружные поверхности ходунков обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

4. ТРЕБОВАНИЯ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ

Климатические исполнения ходунков — У1. У1.1. УХЛ4.2 по ГОСТ 15150—69.

Ходунки климатических исполнений У1, У1.1. УХЛ4.2 сохраняют работоспособность в процессе нормального использования при воздействии температуры, номинальные значения которой приведены в таблице.

Климатическое исполнение	Номинальные значения температуры, С°	
	верхнее	нижнее
У1. У1.1.	+40	-40
УХЛ4.2	+35	+10
При кратковременной эксплуатации ходунков (не более 30 мин). При длительной эксплуатации ходунков устанавливают нижнее номинальное значение температуры минус 25 С°		

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию. Ходунки транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение ходунков без упаковки завода изготовителя не гарантирует их сохранность.

Ходунки не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

6. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании Ortonica.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании ходунков, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре компании Ortonica, или у Вашего регионального представителя.

7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель	Ходунки Ortonica XR102
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Производитель	«Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guandong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China
Импортер в России	ООО «Реамед» Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930655)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Ходунки Ortonica XR102
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- износ и повреждение колес.

Гарантия предусмотрена на изделие целиком, на отдельные детали - гарантия не предусмотрена.



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.
По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



ortonica.ru



8 (800) 707-44-52



service@ortonica.ru



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE



Купили этот товар на маркетплейсе?

По всем возникающим вопросам по товарам, приобретенным на маркетплейсах (OZON, WB и т.д.) у официального дилера ООО «Катион», включая:

- вопросы качества,
 - комплектности товара,
 - условий использования,
- просим обращаться:



8 (800) 550-85-58



info@plus-ion.ru