



ХОДУНКИ

ORTONICA **XR201**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Общая информация .....</b>                                 | <b>3</b>  |
| 1.1. Назначение .....                                            | 3         |
| 1.2. Показания .....                                             | 3         |
| 1.3. Противопоказания .....                                      | 3         |
| 1.4. Меры предосторожности .....                                 | 3         |
| 1.5. Иллюстрация спуска на ходунках .....                        | 4         |
| 1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках .....               | 4         |
| 1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень .....               | 4         |
| 1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода .....          | 4         |
| <b>2. Описание и технические характеристики .....</b>            | <b>5</b>  |
| 2.1. Особенности ходунков .....                                  | 5         |
| 2.2. Технические характеристики .....                            | 5         |
| <b>3. Эксплуатация ходунков .....</b>                            | <b>6</b>  |
| 3.1. Подготовка к эксплуатации .....                             | 6         |
| 3.2. Очистка .....                                               | 10        |
| <b>4. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам</b> | <b>10</b> |
| <b>5. Правила хранения и транспортировки .....</b>               | <b>10</b> |
| <b>6. Сервисное обслуживание .....</b>                           | <b>10</b> |
| <b>7. Гарантийное обслуживание .....</b>                         | <b>11</b> |

# **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

## **1.1. Назначение**

Ходунки Ortonica XR201 (далее по тексту - «ходунки») с увеличенной шириной между поручнями предназначены для пользователей крупной комплекции, для облегчения самостоятельного передвижения в помещениях и во время прогулок на улице. Изготовлены из легкого, но прочного алюминиевого сплава. За счет цельнолитых колес, мягкого сиденья и эластичного упора для спины ходунки комфортны для прогулок. Продуманные места для хранения и индивидуальные настройки под пользователя обеспечивают дополнительный комфорт пользователя.

## **1.2. Показания**

- Умеренные и выраженные явления гемипареза.
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.


## **1.3. Противопоказания**

- Психические расстройства;
- Потеря функциональности обеих рук;
- Нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- Наркотическое или алкогольное воздействие.


## **1.4. Меры предосторожности**

- Не используйте ходунки в качестве кресла-каталки.
- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору при помощи ходунков;
- Не переносите вес тела полностью на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться;
- Не ходите по мокрому или скользкому полу при помощи ходунков;
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности;
- Не тяните ходунки на себя, поднимаясь с кресла или кровати;
- Не используйте ходунки при головокружении;
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела - держать осанку;
- При ходьбе старайтесь смотреть вперед, а не на ноги.


### 1.5. Иллюстрация спуска на ходунках

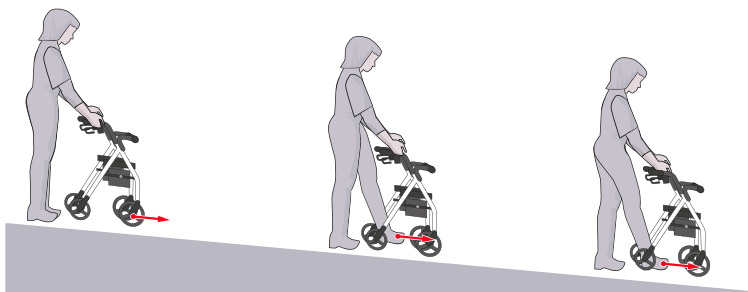

### 1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках

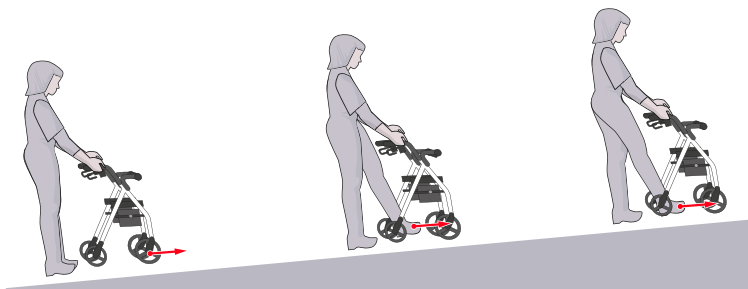

### 1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень

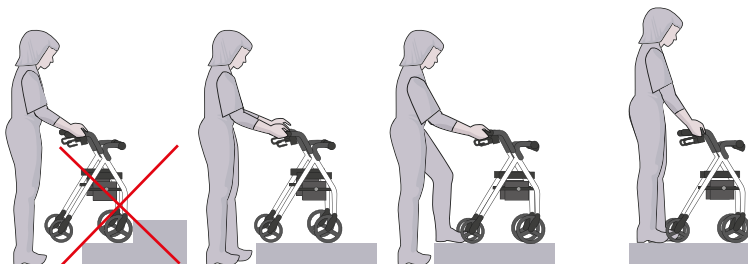


### 1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода



## 2. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1. Особенности ходунков

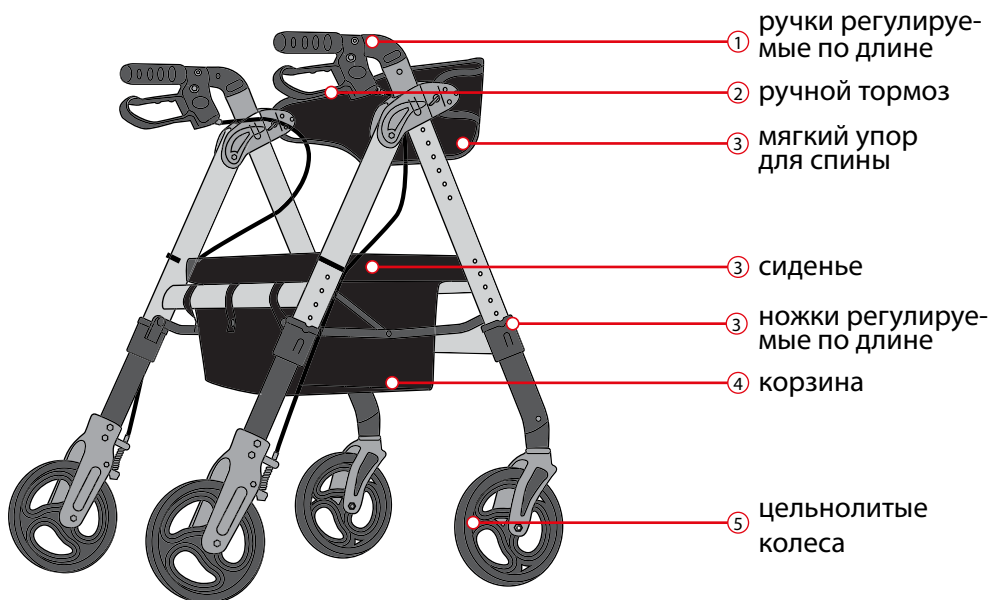

### 2.2. Технические характеристики

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Общая ширина, см                    | 66                                          |
| Общая длина, см                     | 71-80                                       |
| Общая высота, см                    | 87,5-105,5                                  |
| Расстояние между поручнями, см      | 52                                          |
| Длина в сложенном состоянии, см     | 33,5                                        |
| Вес, кг ( $\pm 5\%$ )               | 11                                          |
| Грузоподъемность, кг                | 200                                         |
| Стояночный тормоз                   | двухпозиционные<br>(торможение и остановка) |
| Диаметр колес (передние/задние), см | 20/20                                       |

### 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОДУНКОВ

#### 3.1. Подготовка к эксплуатации

1. Разложите раму ходунков, надавливая вниз на трубы сиденья (рис. 1).

Рис. 1




2. Вставьте ручки в раму ходунков до характерного щелчка (рис. 2). Ручки должны быть установлены параллельно друг другу.

Рис. 2



3. Вставьте колеса в раму ходунков до характерного щелчка (рис. 3).

Рис. 3

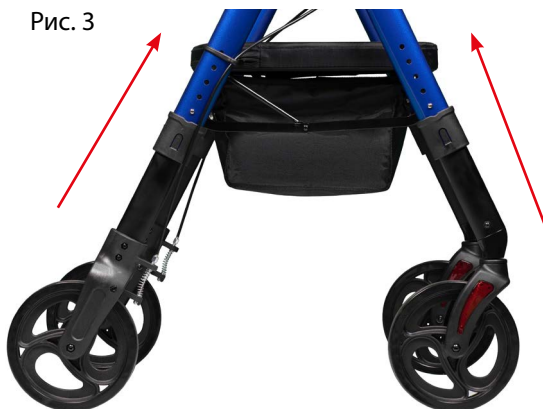

4. Отрегулируйте высоту ходунков в зависимости от роста пользователя. Для того, чтобы отрегулировать высоту ручек зажмите кнопочный фиксатор 1 (рис. 4), установите нужную высоту и отпустите фиксатор. Для того, чтобы отрегулировать высоту колес зажмите кнопочный фиксатор 2 (рис. 4) установите необходимую высоту, отпустите фиксатор.


Рис. 4



Для корректного определения высоты ходунков необходимо:

- Встать между опорами ходунков, выпрямить спину.
- Настроить высоту ходунков так, чтобы рукоятки находились на уровне запястий.
- Ладони опустить к ручкам опор так, чтобы основание большого пальца касалось ручки ходунков (рис. 5).

Рис. 5

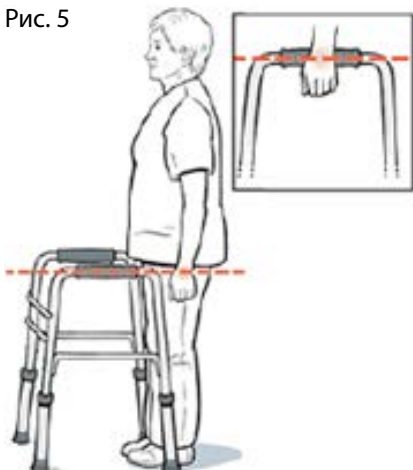

5. Установите упор под спину, для этого задвиньте упор сверху и зафиксируйте с помощью фиксатора (рис. 6).

Рис. 6



6. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоза. Модель ходунков Ortonica XR201 оснащена ручными двухпозиционными стояночными тормозами (рис. 7), обеспечивающими мягкое притормаживание в верхнем положении и полную фиксацию в нижнем положении.



7. Для того, чтобы сложить ходунки необходимо потянуть за ручку под сиденьем вверх (рис. 8).



### 3.2. Очистка

Наружные поверхности ходунков обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ

Климатические исполнения ходунков — У1. У1.1. УХЛ4.2 по ГОСТ 15150—69 (таблица 3).

Ходунки климатических исполнений У1, У1.1. УХЛ4.2 сохраняют работоспособность в процессе нормального использования при воздействии температуры, номинальные значения которой приведены в таблице.

| Климатическое исполнение                                                                                                                                            | Номинальные значения температуры, С° |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                     | верхнее                              | нижнее |
| У1. У1.1.                                                                                                                                                           | +40                                  | -40    |
| УХЛ4.2                                                                                                                                                              | +35                                  | +10    |
| При кратковременной эксплуатации ходунков (не более 30 мин). При длительной эксплуатации ходунков устанавливают нижнее номинальное значение температуры минус 25 С° |                                      |        |

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию. Ходунки транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение ходунков без упаковки завода изготовителя не гарантирует их сохранность.

Ходунки не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

## 6. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании Ortonica.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании ходунков, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре компании Ortonica, или у Вашего регионального представителя.

## 7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель ходунков                                | Ходунки Ortonica XR201                                                                                                                                                                                                                        |
| Гарантийный срок эксплуатации                  | 1 год                                                                                                                                                                                                                                         |
| Производитель                                  | «Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China |
| Импортер в России                              | ООО «Реамед»<br>Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930655)                                                                                                                                     |
| Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет | ООО «Реамед»                                                                                                                                                                                                                                  |
| Адрес                                          | 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11                                                                                                                                                                                                       |
| E-mail                                         | service@ortonica.ru                                                                                                                                                                                                                           |
| Телефон                                        | 8 (800) 707-44-52                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                       |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Наименование, марка, модель изделия                                                                                   | Ходунки Ortonica XR201                                 |
| Срок гарантии                                                                                                         | 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем |
| С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею. | _____подпись покупателя                                |

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- износ и повреждение колес.

Гарантия предусмотрена на изделие целиком, на отдельные детали - гарантия не предусмотрена.



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.  
По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



[ortonica.ru](http://ortonica.ru)



8 (800) 707-44-52



[service@ortonica.ru](mailto:service@ortonica.ru)



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE