



ХОДУНКИ

ORTONICA **XR202**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	3
1.1. Назначение	3
1.2. Показания	3
1.3. Противопоказания	3
1.4. Меры предосторожности	3
1.5. Иллюстрация спуска на ходунках	4
1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках	4
1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень	4
1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода	4
2. Описание и технические характеристики	5
2.1. Особенности ходунков	5
2.2. Технические характеристики	5
3. Эксплуатация ходунков	6
3.1. Подготовка к эксплуатации	6
3.2. Очистка	9
4. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам	10
5. Правила хранения и транспортировки	10
6. Сервисное обслуживание	10
7. Гарантийное обслуживание	11

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Назначение

Ходунки Ortonica XR202 (далее по тексту - «ходунки») обеспечивают комфортное самостоятельное передвижение в помещении и на улице за счет маневренных и долговечных цельнолитых колес. Ручные двухпозиционные стояночные тормоза обеспечивают мягкое притормаживание в верхнем положении и полную фиксацию в нижнем положении. Мягкое сиденье с жестким основанием и эластичный упор для спины делают отдых более комфортным за счет возможности использовать ходунки в качестве стула. Быстросъемные вилки передних колес делают их обслуживание быстрым и удобным. Продуманная система хранения из съемных сумок под сиденьем и на передней опоре, а также потайной карман под сиденьем удобны для транспортировки покупок и личных вещей.

1.2. Показания

- Умеренные и выраженные явления гемипареза;
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей;
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.


1.3. Противопоказания

- Психические расстройства;
- Потеря функциональности обеих рук;
- Нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- Наркотическое или алкогольное воздействие.


1.4. Меры предосторожности

- Не используйте ходунки в качестве кресла-каталки.
- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору при помощи ходунков;
- Не переносите вес тела полностью на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться;
- Не ходите по мокрому или скользкому полу при помощи ходунков;
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности;
- Не тяните ходунки на себя, поднимаясь с кресла или кровати;
- Не используйте ходунки при головокружении;
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела - держать осанку;
- При ходьбе старайтесь смотреть вперед, а не под ноги.


1.5. Иллюстрация спуска на ходунках

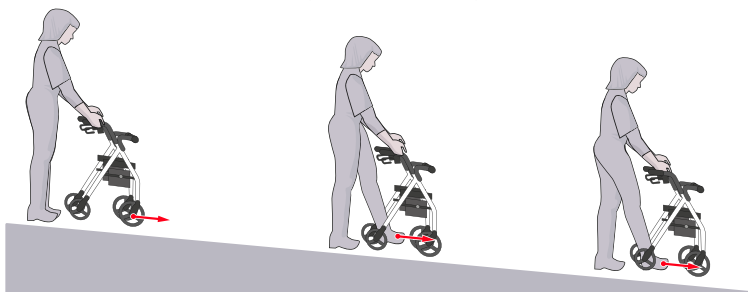

1.6. Иллюстрация крутого подъема на ходунках

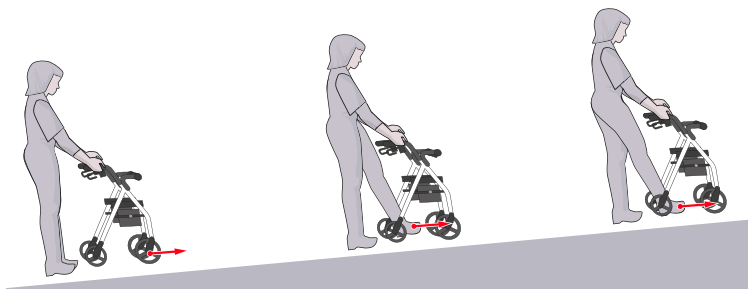

1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень

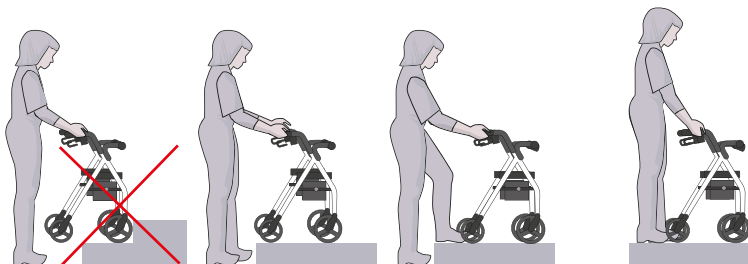


1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода



2. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Особенности ходунков

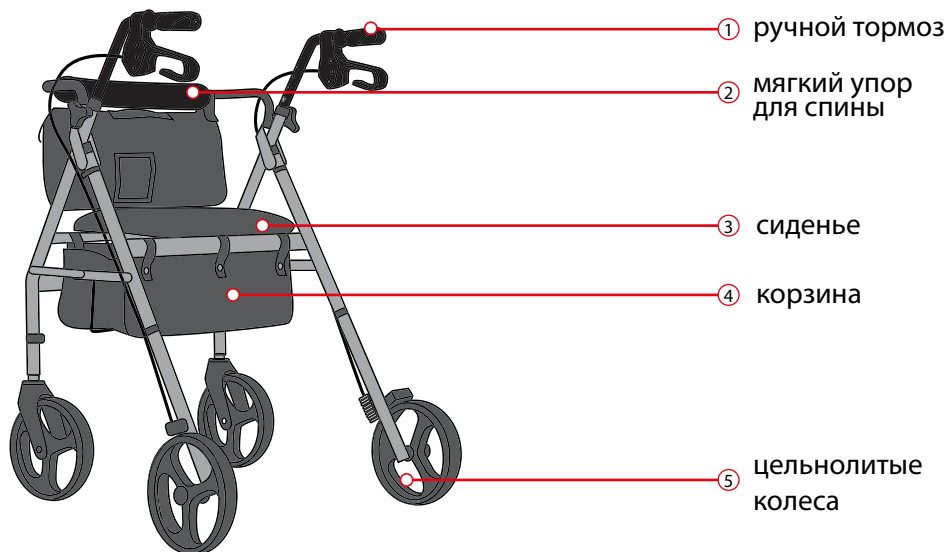

2.2. Технические характеристики

Общая ширина, см	63
Общая длина, см	66,5-69
Общая высота, см	76,5-96
Расстояние между поручнями, см	40
Длина в сложенном состоянии, см	45
Вес, кг ($\pm 5\%$)	8
Грузоподъемность, кг	136
Стояночный тормоз	двухпозиционные (торможение и остановка)
Диаметр колес (передние/задние), см	20/20

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОДУНКОВ

3.1. Подготовка к эксплуатации

1. Разложите раму ходунков. Опустите сиденье, надавите на рычаг (рис. 1), для того чтобы зафиксировать раму.

Рис. 1




2. Установите упор под спину. Для того, чтобы установить полукруглый мягкий упор для спины нажмите на кнопочный фиксатор (рис. 2), вставьте упор и отпустите фиксатор.

Рис. 2




3. Вставьте ручки в раму ходунков, фиксатором установите их высоту. Установите ручки в раму, они должны быть установлены параллельно друг другу. Отрегулируйте высоту ручек ходунков в зависимости от роста пользователя. Для этого необходимо ослабить болты-барашки (рис. 3), установить нужную высоту и закрутить болты.

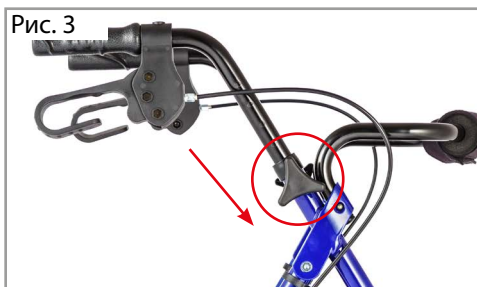

Для корректного определения высоты ходунков необходимо:

- Встать между опорами ходунков, выпрямить спину.
- Настроить высоту ходунков так, чтобы рукоятки находились на уровне запястий.
- Ладони опустить к ручкам опор так, чтобы основание большого пальца касалось ручки ходунков (рис. 4).

Рис. 4

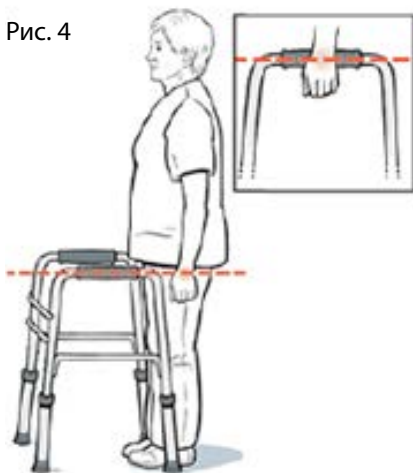

4. Вставьте колеса в раму ходунков, нажав на кнопочный фиксатор (рис. 5), установите колесо и вставьте штырьковый фиксатор (рис. 6).

5. Для того, чтобы отрегулировать высоту ножек, снимите штырьковый фиксатор (рис. 6), затем снимите колесо, нажав на кнопочный фиксатор (рис. 5). Установите необходимую высоту (рис. 7), вставьте колесо в раму и зафиксируйте штырьковый фиксатор.



5. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоза. Модель ходунков Ortonica XR202 оснащена ручными двухпозиционными стояночными тормозами (рис. 8), обеспечивающими мягкое притормаживание в верхнем положении и полную фиксацию в нижнем положении.



6. Для того, чтобы сложить ходунки необходимо поднять сиденье, потянуть за ремешок внутри сумки вверх (рис. 9).



3.2. Очистка

Наружные поверхности ходунков обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

4. ТРЕБОВАНИЯ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ

Климатические исполнения ходунков — У1, У1.1. УХЛ4.2 по ГОСТ 15150—69.

Ходунки климатических исполнений У1, У1.1. УХЛ4.2 сохраняют работоспособность в процессе нормального использования при воздействии температуры, номинальные значения которой приведены в таблице.

Климатическое исполнение	Номинальные значения температуры, С°	
	верхнее	нижнее
У1, У1.1.	+40	-40
УХЛ4.2	+35	+10
При кратковременной эксплуатации ходунков (не более 30 мин). При длительной эксплуатации ходунков устанавливают нижнее номинальное значение температуры минус 25 С°		

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию. Ходунки транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение ходунков без упаковки завода изготовителя не гарантирует их сохранность.

Ходунки не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

6. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании Ortonica.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании ходунков, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре компании Ortonica, или у Вашего регионального представителя.

7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель ходунков	Ходунки Ortonica XR202
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Производитель	«Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China
Импортер в России	ООО «Реамед» Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930655)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Ходунки Ortonica XR202
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- износ и повреждение колес.

Гарантия предусмотрена на изделие целиком, на отдельные детали - гарантия не предусмотрена.



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.
По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



ortonica.ru



8 (800) 707-44-52



service@ortonica.ru



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE