



ХОДУНКИ

ORTONICA **XR206**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Общая информация .....</b>                                 | <b>3</b>  |
| 1.1 Назначение .....                                             | 3         |
| 1.2. Показания .....                                             | 3         |
| 1.3. Противопоказания .....                                      | 3         |
| 1.4. Меры предосторожности .....                                 | 3         |
| 1.5. Иллюстрация спуска на ходунках .....                        | 4         |
| 1.5. Иллюстрация крутого подъема на ходунках .....               | 4         |
| 1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень .....               | 4         |
| 1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода .....          | 4         |
| <b>2. Описание и технические характеристики .....</b>            | <b>5</b>  |
| 2.1. Особенности ходунков .....                                  | 5         |
| 2.2. Технические характеристики .....                            | 5         |
| <b>3. Эксплуатация ходунков .....</b>                            | <b>6</b>  |
| 3.1. Подготовка к эксплуатации .....                             | 6         |
| 3.2. Очистка .....                                               | 9         |
| <b>4. Требования стойкости к внешним воздействующим факторам</b> | <b>9</b>  |
| <b>5. Правила хранения и транспортировки .....</b>               | <b>10</b> |
| <b>6. Сервисное обслуживание .....</b>                           | <b>10</b> |
| <b>7. Гарантийное обслуживание .....</b>                         | <b>11</b> |

# **1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

## **1.1 Назначение**

Ходунки Ortonica XR206 (далее по тексту - «ходунки») предназначены для облегчения перемещения детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Размеры ходунков адаптированы к анатомии ребенка, обеспечивая максимальный комфорт.

Легкий и прочный алюминиевый каркас весит всего 2,4 кг, что упрощает маневрирование. Грузоподъемность до 100 кг позволяет использовать их для детей разного возраста и комплекции. Опорные ножки оснащены цельнолитыми колесами и противоскользящими насадками для надежного сцепления с полом.

Ходунки имеют обтекаемую форму без острых углов и эргономичные накладки на поручнях для удобства. Ножки регулируются по высоте и могут использоваться в фиксированном или шагающем режиме. Складная конструкция с кнопочным механизмом обеспечивает легкость хранения и транспортировки.

## **1.2. Показания**

- Умеренные и выраженные явления гемипареза.
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

## **1.3. Противопоказания**

- Психические расстройства.
- Потеря функциональности обеих рук.
- Нарушения статики и координации движения.
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

## **1.4. Меры предосторожности**

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору при помощи ходунков.
- Не переносите весь вес тела полностью на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться.
- Не ходите по мокрому или скользкому полу при помощи ходунков.
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности.
- Не тяните ходунки на себя, поднимаясь с кресла или кровати.
- Не используйте ходунки при головокружении.
- Не подходите слишком близко или в упор к ходункам.
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела, держите осанку.
- При ходьбе старайтесь смотреть вперед, а не под ноги.
- Дети должны использовать ходунки только под наблюдением взрослых.


## 1.5. Иллюстрация спуска на ходунках



## 1.5. Иллюстрация крутого подъема на ходунках



## 1.7. Иллюстрация подъема на бордюрный камень

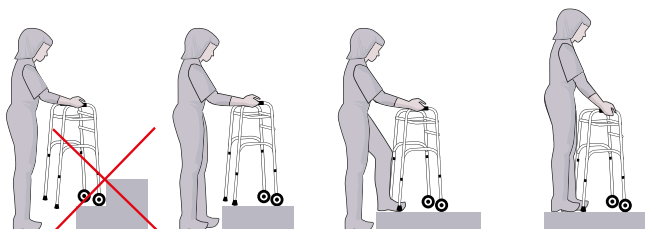

## 1.8. Иллюстрация преодоления пешеходного перехода



Любое нарушение рекомендаций изготовителя по применению ходунка может нанести вред лицу, пользующемуся ходунком, или привести к его повреждению.

## 2. ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1. Особенности ходунков



### 2.2. Технические характеристики


|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Общая ширина, см                | 55-56     |
| Общая длина, см                 | 48-50,5   |
| Общая высота, см                | 65,5-76,5 |
| Расстояние между поручнями, см  | 37,5      |
| Вес, кг ( $\pm 5\%$ )           | 2,4       |
| Грузоподъемность, кг            | 100       |
| Длина в сложенном состоянии, см | 10,5      |
| Диаметр колес (передние), см    | 12,5      |

### 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОДУНКОВ

#### 3.1. Подготовка к эксплуатации

1. Разложите раму ходунков, для этого поверните обе стороны ходунков до характерного щелчка (рис. 1).

Рис. 1

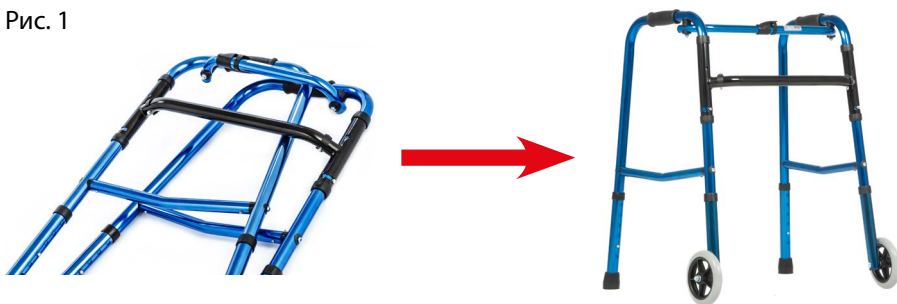

2. Отрегулируйте высоту ножек, для этого зажмите кнопочный фиксатор (рис. 2), установите необходимую высоту и отпустите фиксатор. Убедитесь, что ножки ходунков находятся на одинаковой высоте.


Рис. 2



Для корректного определения высоты ходунков необходимо:


- Встать между опорами ходунков, выпрямить спину.
- Настроить высоту ходунков так, чтобы рукоятки находились на уровне запястий.
- Ладони опустить к ручкам опор так, чтобы основание большого пальца касалось ручки ходунков (рис. 3).

Рис. 3

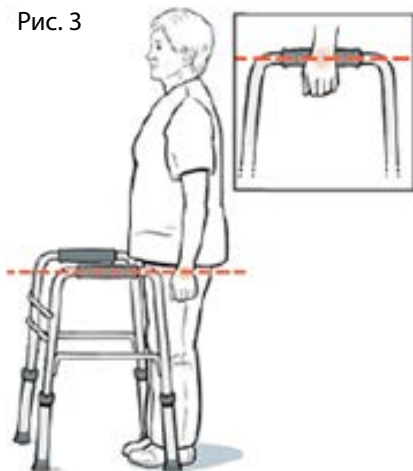

3. Для перевода ходунков в фиксированный режим, установите съемные замки (рис. 4) на боковые опоры. Для перевода в шагающий режим переместите съемные замки (рис. 4) на переднюю опору (с каждой стороны).

Рис. 4

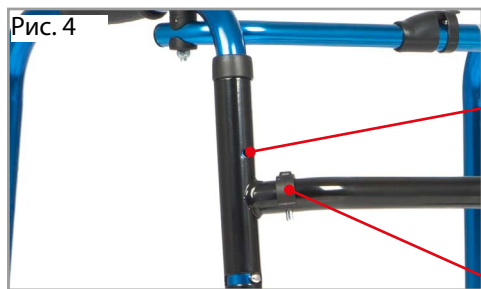


Фиксированный режим



Шагающий режим

4. Для того, чтобы сложить ходунки зажмите фиксатор на передней опоре рамы (рис. 5) и поверните боковые рамы внутрь.

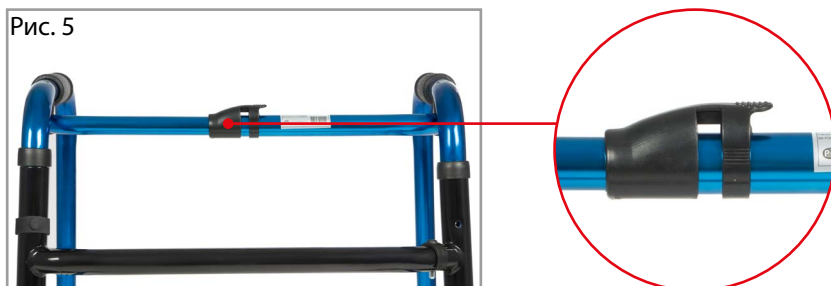



### 3.2. Очистка

Наружные поверхности ходунков обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ

Климатические исполнения ходунков — У1. У1.1. УХЛ4.2 по ГОСТ 15150—69.

Ходунки климатических исполнений У1, У1.1. УХЛ4.2 сохраняют работоспособность в процессе нормального использования при воздействии температуры, номинальные значения которой приведены в таблице.

| Климатическое исполнение                                                                                                                                            | Номинальные значения температуры, С° |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                     | верхнее                              | нижнее |
| У1. У1.1.                                                                                                                                                           | +40                                  | -40    |
| УХЛ4.2                                                                                                                                                              | +35                                  | +10    |
| При кратковременной эксплуатации ходунков (не более 30 мин). При длительной эксплуатации ходунков устанавливают нижнее номинальное значение температуры минус 25 С° |                                      |        |

## **5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию. Ходунки транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение ходунков без упаковки завода изготовителя не гарантирует их сохранность.

Ходунки не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

## **6. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями компании Ortonica.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании ходунков, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей, можно в сервисном центре компании Ortonica, или у Вашего регионального представителя.

## 7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель ходунков                                | Ходунки Ortonica XR206                                                                                                                                                                                                                        |
| Гарантийный срок эксплуатации                  | 1 год                                                                                                                                                                                                                                         |
| Производитель                                  | «Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China |
| Импортер в России                              | ООО «Реамед»<br>Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930655)                                                                                                                                     |
| Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет | ООО «Реамед»                                                                                                                                                                                                                                  |
| Адрес                                          | 394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11                                                                                                                                                                                                       |
| E-mail                                         | service@ortonica.ru                                                                                                                                                                                                                           |
| Телефон                                        | 8 (800) 707-44-52                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                       |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Наименование, марка, модель изделия                                                                                   | Ходунки Ortonica XR206                                 |
| Срок гарантии                                                                                                         | 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем |
| С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею. | _____подпись покупателя                                |

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- износ и повреждение колес.

Гарантия предусмотрена на изделие целиком, на отдельные детали - гарантия не предусмотрена.



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.

По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



[ortonica.ru](http://ortonica.ru)



8 (800) 707-44-52



[service@ortonica.ru](mailto:service@ortonica.ru)



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE