



ХОДУНКИ КОЛЕСНЫЕ, СКЛАДНЫЕ

ORTONICA XR208



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Ответственность	3
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	4
1.1. Назначение	4
1.2. Показания к применению:.....	4
1.3. Противопоказания к применению:.....	5
1.4. Основные параметры и характеристики.....	5
1.5 Конструктивные требования	7
1.6. Требования надежности и ремонтпригодности	7
1.7. Качество и гарантия	7
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	9
2.1. Меры предосторожности	9
2.2. Порядок действий при передвижении с ходунками.....	10
2.3. Порядок действий при спуске, подъеме и переходе по пешеходному переходу.....	11
2.4. Указания по эксплуатации	13
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	16
4. ХРАНЕНИЕ.....	17
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	17
6. ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИЯ.....	18

ВВЕДЕНИЕ

Ходунки колесные, складные Ortonica XR208 (далее по тексту – ходунки, изделие) складываются и раскладываются без инструмента. Ходунки оснащены мягким сиденьем с ручкой для складывания, полукруглой мягкой опорой для спины и сумкой для личных вещей. Благодаря мягкому сиденью и опоре для спины ходунки могут быть использованы для комфортного отдыха.



Прочтите Инструкцию по эксплуатации до того, как начнете пользоваться ходунками. Вы получите важные указания по управлению, которые позволят полностью использовать технические преимущества ходунков Ortonica.

Ответственность

За ущерб, возникший вследствие использования изделия не по назначению, изготовитель ответственности не несет.

Для предотвращения опасных ситуаций все лица, использующие данное изделие или проводящие работы по техническому обслуживанию, ремонту или контролю, должны читать и выполнять указания настоящей Инструкции.

Использование неоригинальных или непроверенных запасных частей и дополнительных устройств может отрицательно повлиять на конструктивно заданные свойства изделия или его работоспособность и тем самым отрицательно сказаться на эксплуатации.

За ущерб и повреждения, возникшие в результате использования непроверенных деталей и дополнительных устройств, самовольного проведения изменений в конструкции изделия потребителем, ответственность производителя полностью исключена.

В исполнении гарантийных обязательств владельцу изделия может быть отказано в случае случайного или намеренного попадания иностранных предметов, веществ и т. п. во внутренние или внешние части изделия.



ВНИМАНИЕ!

1. Перед началом использования изделия познакомьтесь основательно с настоящей Инструкцией.
2. При передаче изделия другому владельцу вместе с ним должна быть передана настоящая Инструкция.

Существенная опасность возрастает, если пользователь не следует правилам эксплуатации и мерам техники безопасности.

Для гарантии безопасной работы, перед использованием изделия, каждый пользователь должен быть полностью ознакомлен с положениями настоящей Инструкции и мерами предосторожности.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение

Настоящая Инструкция распространяется на ходунки колесные, складные Ortonica XR208, которые предназначены для облегчения самостоятельного передвижения людей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата и пожилых людей в домашних условиях и во время прогулок на улице. Использование ходунков улучшает координацию движений, позволяет сохранять равновесие и уменьшает нагрузку на ноги.

1.2. Показания к применению:

Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие:

- заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;
- последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.

Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:

- прогрессирующих мышечных дистрофий;
- спинальных мышечных атрофий, в том числе спинальной мышечной атрофии Верднига-Гоффмана;
- аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга.

1.3. Противопоказания к применению:

- значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя параплегия);
- значительно выраженные нарушения статики и координации движений гиперкинетические, атактические нарушения);
- наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.

1.4. Основные параметры и характеристики

1.4.1. Ходунки полностью готовы к работе и работоспособны при условии соблюдения правил хранения, транспортирования и указаний эксплуатационной документации.

1.4.2. Выступающие части изделия, которые могут соприкасаться с руками, ногами и другими частями тела пользователя и сопровождающего в процессе езды и технического обслуживания, являются безопасными.

1.4.3. Эксплуатация ходунков должна осуществляться при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 98% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

1.4.4. Изделие является прочным и устойчивым при воздействии на него механических нагрузок, возникающих в обычных условиях эксплуатации.

1.4.5. Все резьбовые соединения надежно затянуты.

1.4.6. Все вращающиеся детали и сборочные единицы проворачиваются в своих опорах без заеданий.

1.4.7. Основные технические характеристики изделия соответствуют требованиям, приведенным в Таблице №1.

Таблица №1. Технические характеристики

Габаритная длина, мм	640
Габаритная ширина, мм	610
Габаритная высота, мм	720-890
Расстояние между поручнями, мм	475
Габаритные размеры в сложенном виде (Д x Ш x В), мм	645x260x765
Масса нетто, кг не более	9,3
Максимальная масса пользователя, кг	130
Диаметр колес, мм (передних/задних)	201
Тип тормоза	Рабочий (ручной двухпозиционный)
Материал рамы	Сталь



1.5 Конструктивные требования

1.5.1. Комплектация

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Ходунки	1
2	Паспорт изделия	1

1.6. Требования надежности и ремонтпригодности

1.6.1. Эксплуатация ходунков должна производиться в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

1.6.2. Средний срок службы ходунков при эксплуатации – 2 года.

1.6.3. За предельное состояние принимается состояние ходунков, при котором восстановление их работоспособности невозможно, либо экономически нецелесообразно (стоимость годового ремонта превышает половину стоимости нового изделия).

1.7. Качество и гарантия

1.7.1. Гарантийный ремонт – это работы, направленные на бесплатное восстановление работоспособности изделия в период действия гарантийного срока.

1.7.2. Уполномоченный представитель компании производителя гарантирует качество и безопасность продукции в течение гарантийного срока при соблюдении требований транспортирования и хранения продукции, а также при соблюдении правил ее применения.

Гарантийный срок хранения – 24 месяца.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

1.7.3. Гарантийный срок изделия исчисляется с момента приобретения изделия потребителем.

1.7.4. В случае обнаружения неисправностей в ходунках в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии гарантийного талона.

1.7.5. Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до устранения неисправности силами предприятия - изготовителя или ремонтной организации.

1.7.6. Уполномоченный представитель компании производителя обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать ходунки вплоть до замены их в целом, если за этот срок ходунки выйдут из строя или ухудшатся их характеристики, установленные настоящей инструкцией.

1.7.7. Уполномоченный представитель компании производителя не несет ответственности в случае повреждений ходунков, возникших в следующих случаях:

- превышения допустимой нагрузки, указанной в настоящей инструкции;
- сколов, вмятин, трещин, царапин и поломки деталей в результате ударов о другие предметы;
- повреждений, вызванных потерей болтов или гаек, а также сбитых болтовых соединений из-за частых монтажных работ;
- естественного износа изделия, деталей и расходных материалов, в том числе износа шин, накладок в процессе эксплуатации;
- любых посторонних вмешательств в конструкцию оборудования;
- использования не по назначению;
- действия непреодолимых сил (например, пожар, несчастный случай, военные действия).

1.7.8. При возникновении неисправности, связанной с неправильным функционированием ходунков, необходимо обратиться в сервисный центр уполномоченного представителя компании производителя.

1.7.9. Срок службы ходунков – 24 месяца.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1. Меры предосторожности

Меры предосторожности перед началом работы и в процессе эксплуатации:

- перед использованием проконтролируйте надежность крепления всех деталей ходунков;
- двигайтесь внутри ходунков, а не следуя за ними;
- не перемещайте ходунки слишком далеко от себя;
- не подходите слишком близко к передней перекладине, так как это может уменьшить опору и привести к падению назад;
- не допускайте на маршруте движения незакрепленных половиков и ковров с толстым ворсом;
- не переносите весь вес тела на одну сторону рамы – ходунки могут опрокинуться;
- не используйте ходунки при головокружении;
- старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку;
- при ходьбе смотрите вперед, а не под ноги;
- держитесь за рукоятки всегда двумя руками, а при движении сначала медленно продвиньте ходунки вперед, зафиксируйте их тормозом и затем шагните вперед.
- не используйте ходунки в качестве кресла-каталки.

Запрещается:

- эксплуатация неисправных ходунков;
- передвигаться по мокрому и скользкому полу;
- подниматься по лестнице и эскалатору;
- наклонять ходунки вперед;
- тянуть ходунки на себя при подъёме из положения сидя.

2.2. Порядок действий при передвижении с ходунками

При использовании ходунков необходимо перекачать их вперед на расстояние одного шага. Шаг должен быть небольшим. При этом, если одна нога повреждена, важно сначала шагнуть именно ей, наступая на пятку и плавно опуская всю стопу, и лишь после этого, крепко держась за ручки, оторвать от пола носок здоровой ноги и шагнуть вперед. Нельзя ставить ходунки слишком далеко от себя, это может привести к падению.

При наличии у ходунков рабочих тормозов необходимо сначала медленно продвинуть ходунки вперед, затем зафиксировать их тормозом и шагнуть вперед. Шаг должен быть небольшим. При этом, если одна нога повреждена, важно, сначала шагнуть именно ей, наступая на пятку и плавно опуская всю стопу, и лишь после этого, крепко держась за ручки, оторвать от пола носок здоровой ноги и шагнуть вперед. Нельзя ставить ходунки слишком далеко от себя, это может привести к падению.

При использовании ходунков для подъема с кресла (стула, кровати) необходимо расположить ходунки прямо перед собой и пододвинуться к краю сиденья так, чтоб колени располагались над пальцами ног. Затем нужно опереться на ручки и, слегка отталкиваясь от них, приподняться и встать. В положении полустоя нужно крепко взяться за ручки ходунков, выпрямиться и сделать небольшой шаг внутрь рамы. После того, как достигнут нужный уровень устойчивости, можно начинать движение. Важно, вставая, не тянуть ходунки на себя, так как от этого они могут перевернуться.

При использовании ходунков, для того чтобы сесть в кресло (стул, кровать), необходимо повернуться к креслу спиной и подойти к нему максимально близко (чтобы ноги касались сиденья). Если одна нога травмирована, следует поставить ее слегка перед собой и, крепко сжимая ручку, перенести весь вес на здоровую ногу. Затем нужно ухватиться за подлокотник кресла сначала одной рукой, потом второй и после этого медленно сесть в кресло.

2.3. Порядок действий при спуске, подъеме и переходе по пешеходному переходу


- Для спуска:

- перенесите центр тяжести тела назад и переставляйте/перекатывайте ходунки на расстояние примерно равное длине шага, двигаясь внутри ходунков;
- при наличии рабочих тормозов, используйте их для более безопасного спуска.




- Для подъема:

- перенесите центр тяжести тела вперед и переставляйте/перекатывайте ходунки на расстояние примерно равное длине шага, двигаясь внутри ходунков;
- при наличии рабочих тормозов, используйте их для более безопасного подъема.

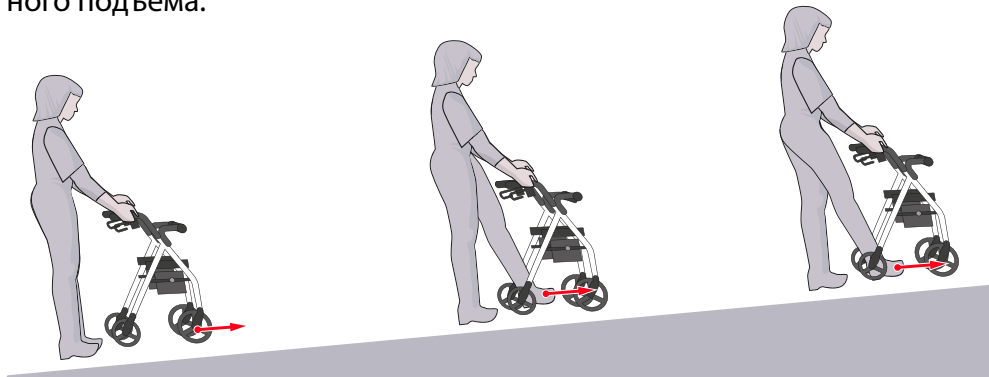

- Для подъема на бордюрный камень:

- подойдите максимально близко к бордюрному камню;
- поднимите ходунки на бордюрный камень, держа их за рукоятки;
- поставьте одну ногу на бордюрный камень и, опираясь на ходунки, поднимитесь наверх, подтягивая за собой вторую ногу.

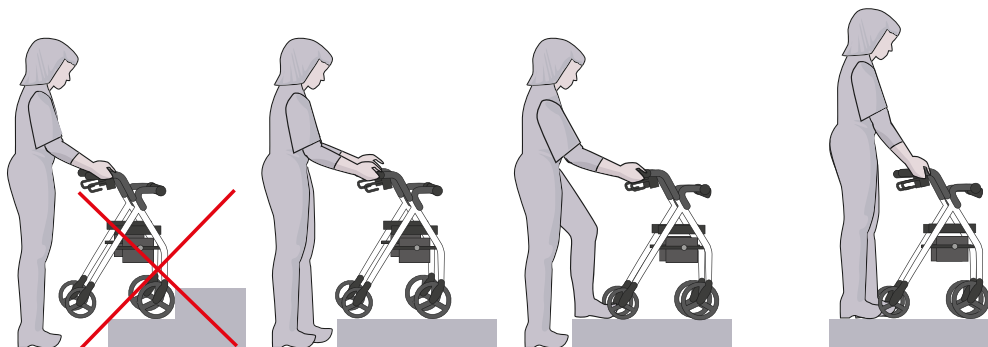

- Для перехода по пешеходному переходу:

- подойдите к съезду с тротуара на проезжую часть, оборудованную пешеходным переходом;
- поставьте ходунки на стояночный тормоз (при его наличии);
- дождитесь разрешающего сигнала светофора;
- убедитесь в отсутствии транспортных средств на пешеходном переходе, снимите ходунки со стояночного тормоза (при наличии) и осуществите спуск;
- не задерживайтесь и не останавливайтесь на проезжей части дороги, в том числе на линии горизонтальной дорожной разметки, разделяющей встречные и попутные потоки транспортных средств, за исключением остановки на островках безопасности;
- при приближении к краю проезжей части совершите подъем.



2.4. Указания по эксплуатации

2.4.1. Условия эксплуатации

Ходунки предназначены для обеспечения стабильной опоры при передвижении людей с ограниченными возможностями, когда они стоят или передвигаются; они также могут быть использованы во время реабилитации.

Ходунки можно использовать в домашних условиях, в лечебно-профилактических и других учреждениях, а также на дорогах с твердым покрытием.

2.4.2. Перед использованием необходимо отрегулировать высоту ходунков.




Использование слишком высоких или низких ходунков может привести к нарушению осанки и спровоцировать появление болезненных ощущений в руках, плечах, шее и спине.

Для подбора высоты ходунков необходимо:

- встать между опорами ходунков, выпрямив спину;
- настроить высоту ходунков так, чтобы рукоятки находились на уровне запястий;
- опустить ладони к опорам так, чтобы основание большого пальца касалось рукоятки ходунков. (рис. 1).


Рис. 1

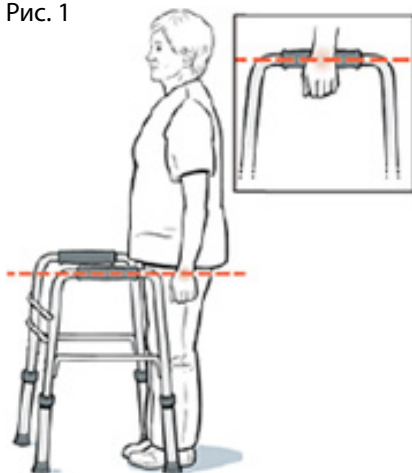

2.4.3. Сборка и регулировка

1. Разложите раму ходунков, надавливая вниз на трубы сиденья (рис. 2).

Рис. 2

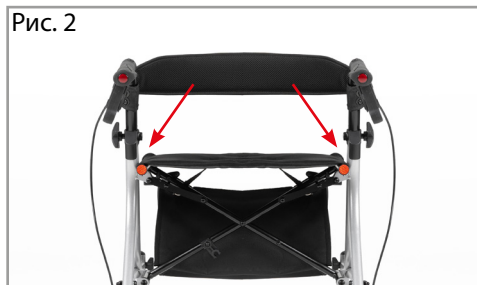

2. Отрегулируйте высоту ручек в зависимости от роста пользователя. Ослабьте барашковый фиксатор на рукоятке ходунков (рис. 3). Установите необходимую высоту рукоятки ходунков.

Аналогичные действия повторите для второй рукоятки. Убедитесь, что рукоятки ходунков расположены на одинаковой высоте параллельно друг другу.

Рис. 3



3. Повесьте сумку на специальные держатели у труб сиденья (рис. 4).

Рис. 4



4. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоза.

Модель ходунков оснащена двухпозиционными стояночными тормозами.

Перевод ручек тормозов в верхнее положение обеспечивает мягкое притормаживание во время движения. Перевод ручек тормозов в нижнее положение обеспечивает полную фиксацию во время остановки (рис. 5).



5. Для того, чтобы сложить ходунки необходимо потянуть за ручку на сиденье вверх до полного складывания ходунков и их фиксации (рис. 6).

Рис. 6



Если при складывании чувствуется жесткое сопротивление, не применяйте силу. Убедитесь, что тормозной трос свободно уходит внутрь рамы и не зажат элементами складного механизма.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Техническое обслуживание и уход – это работы, направленные на поддержание работоспособности ходунков.

Ответственность за своевременное проведение данных работ лежит полностью на пользователе ходунков.

Техническое обслуживание должно включать в себя: проверку целостности ремней, застежек и липучек, протяжку резьбовых соединений, очистку и смазку колес и всех подвижных элементов медицинского изделия, а также проверку целостности рамы и мягких накладок.

При техническом обслуживании колесных ходунков необходимо проверять целостность шин, работоспособность тормозных механизмов и ручных фиксаторов, а также исправность аксессуаров.

Периодичность проведения, а также наименование работ по техническому обслуживанию и уходу указаны в Таблице № 2.

Таблица № 2. Периодичность проведения, а также наименование работ по техническому обслуживанию ходунков XR208 и уходу за ним.

Наименование работ	Периодичность проведения		
	Перед каждой поездкой	После каждой поездки	Каждые 30 дней
Проверка целостности ремней, застежек и липучек	Х		
Проверка тормозных механизмов	Х		
Проверка износа шин, при предельном износе (износ протектора ~ 90°) замена	Х		
Протяжка резьбовых соединений			Х
Мойка, чистка		Х	

Изделие поставляется нестерильным. Для чистки обивки и ремней используйте теплую воду и неагрессивное моющее средство. Пятна выводите при помощи губки или мягкой щетки. Допускается влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы, ходовой части и колес агрессивными чистящими средствами, после чего элементы ходунков необходимо хорошо высушить.

Ремонт – это работы, направленные на восстановление работоспособности изделия. Ремонт ходунков Ortonica может выполняться исключительно в сервисном центре компании-производителя. Выполнение ремонтных работ осуществляется оригинальными запасными частями производителя.

Получить информацию о проведении ремонтных работ и обслуживании ходунков, а также узнать стоимость и возможность приобретения запасных частей можно в сервисном центре производителя или по месту приобретения изделия.

4. ХРАНЕНИЕ

Ходунки, освобожденные от транспортной упаковки, должны храниться при температуре окружающего воздуха от -50°C до +40°C, относительной влажности до 98% (при температуре +25°C) и атмосферном давлении от 84 кПа до 106,7 кПа (от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.).

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование ходунков осуществляется в сложенном виде. Ходунки транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозок в транспортной упаковке завода - изготовителя при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C, относительной влажности до 100% (при температуре +25°C) и атмосферном давлении от 84 кПа до 106,7 кПа (от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.).

Транспортировка ходунков без упаковки завода - изготовителя не гарантирует его сохранность. Повреждения ходунков, полученные в результате транспортировки без упаковки завода – изготовителя, устраняются потребителем.

6. ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ И ИНФОРМАЦИЯ

Мы собрали для Вас всю полезную информацию в одном месте. В разделе Вы найдете QR-коды, обеспечивающие мгновенный доступ к полезным ресурсам, инструкциям и товарам.

Купили этот товар на маркетплейсе?



По всем возникающим вопросам по товарам, приобретенным на маркетплейсах (OZON, WB и т.д.) у официального дилера ООО «Катион», включая:

- вопросы качества,
- комплектности товара,
- условий использования,

просим обращаться:



8 (800) 550-85-58



info@plus-ion.ru

Создайте комфортное пространство для жизни



Обеспечьте комфорт в повседневной жизни с помощью практичных решений.



Санитарные стулья



Товары для ванны



Инвалидные коляски



Противопролежневые матрасы



Противопролежневые подушки

Получите подарок за отзыв

Расскажите, что Вам нравится в продукции Ortonica и получите подарок.



Оставить отзыв

Получите поддержку от государства

Получите компенсацию за ходунки через Социальный фонд России (СФР).



Получить компенсацию



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.
По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



ortonica.ru



8 (800) 707-44-52



service@ortonica.ru



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE