



ХОДУНКИ
ORTONICA XR209



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение	2
Показания	3
Противопоказания	3
Меры предосторожности.....	3
Подготовка к эксплуатации	4
технические характеристики.....	6
Гарантийное обслуживание	7

НАЗНАЧЕНИЕ

Ходунки Ortonica XR209 с заднеопорной конструкцией предназначены для передвижения детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в помещении. Способствуют развитию и восстановлению навыков ходьбы. Конструкция включает U-образную раму, расположенную позади пользователя, что обеспечивает стабильность и поддержку. Опорные ножки оснащены цельнолитыми колесами, а передние колеса самоориентирующиеся, что облегчает маневрирование. Ходунки имеют модульную конструкцию, адаптированную под физиологические особенности ребенка. Рама регулируется по высоте, а съемные подлокотники можно настраивать по длине вылета, высоте, ширине и углу наклона. Дополнительно доступен съемный мягкий фиксатор грудной клетки, который регулируется по ширине, длине вылета и углу наклона, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность во время использования.



ПОКАЗАНИЯ

- Тренировка ходьбы
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ


- Психические расстройства.
- Потеря функциональности обеих рук.
- Нарушения статики и координации движения.
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не используйте ходунки в качестве кресла-каталки.
- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками.
- Не переносите вес тела полностью на одну сторону рамы - ходунков может опрокинуться.
- Используйте ходунки на ровной поверхности без каких-либо препятствий. Помните о пониженной маневренности на скользкой дороге.
- Не используйте ходунки при головокружении.
- При регулировке ходунков, убедитесь в том, что движущиеся детали не сжимают и не защемляют части тела.
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности.
- Не тяните ходунки на себя, поднимаясь с кресла или кровати.
- При ходьбе старайтесь смотреть вперед, а не под ноги.
- Дети должны использовать ходунки только под наблюдением взрослых.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Ослабьте барашковые болты (рис. 1), разложите раму и туго закрутите болты.

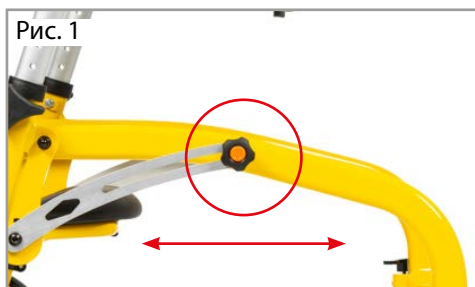

2. Установите верхнюю часть конструкции в раму ходунков и зафиксируйте барашковыми болтами. Для того, чтобы отрегулировать высоту ходунков в зависимости от роста пользователя необходимо открутить барашковые болты (рис. 2), установить нужную высоту и закрутить болты.

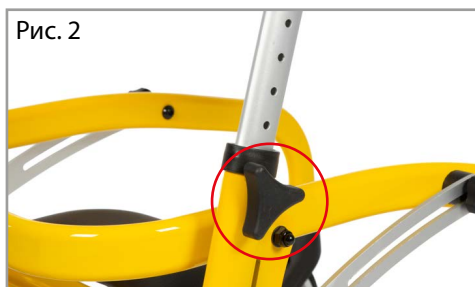

3. Установите фиксатор грудной клетки с помощью винта и отвертки (рис. 3). Для того, что отрегулировать фиксатор по глубине ослабьте винт (рис. 4), установите удобное положение и туго закрутите винт.



4. Отрегулируйте фиксатор грудной клетки по ширине, для этого ослабьте барашковый болт (рис. 5), установите удобное положение и туго закрутите болт.




5. Отрегулируйте глубину подлокотников. Для этого ослабьте фиксатор (рис. 6), установите необходимую глубину подлокотников и затяните фиксатор.

6. Отрегулируйте угол наклона подлокотников. Для этого ослабьте фиксатор (рис. 7), установите необходимый угол наклона подлокотников и затяните фиксатор.



7. Отрегулируйте глубину опор для рук. Для этого ослабьте фиксатор (рис. 8), установите необходимую глубину подлокотников и затяните фиксатор.

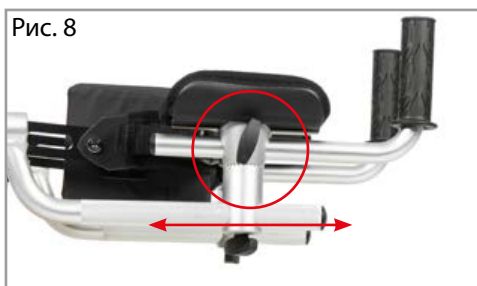

8. Для того, чтобы сложить ходунки необходимо ослабить барашковый болт на раме и потянуть раму вверх. (рис. 9).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая ширина, см	61-71,5
Общая длина, см	71-86
Общая высота, см	63-92
Расстояние между поручнями, см	34,5-62,5
Длина в сложенном состоянии, см	71
Вес, кг ($\pm 5\%$)	10,5
Грузоподъемность, кг	100
Диаметр колес (передние/задние), см	15,5/20,4

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель ходунков	Ходунки Ortonica XR209
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Производитель	«Гуандун Даянг Медикал Технолоджи Ко., Лтд.», Китай, Guangdong Dayang Medical Technology Co., Ltd., Xingxian Development Zone, Changhongling Industrial Park (2nd Phase), Shishan, Nanhai District, 528234 Foshan, People's Republic of China
Импортер в России	ООО «Реамед» Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2016/4717 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02930655)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Ходунки Ortonica XR209
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- износ и повреждение колес.

Гарантия предусмотрена на изделие целиком, на отдельные детали - гарантия не предусмотрена.



Представленные фотографии носят иллюстративный характер.
По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:



ortonica.ru



8 (800) 707-44-52



service@ortonica.ru



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



ОДНОКЛАССНИКИ



ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE